



ResMed

AirSense™ 10 AUTOSET

ELITE



Pulsante Home per tornare alla schermata iniziale in qualsiasi momento

Pulsante Start/Stop per avviare la terapia

Selettore per navigare tra le opzioni e modificarle

Presca d'aria per la connessione del circuito respiratorio

Guida rapida
Italiano

Prima di utilizzare l'apparecchio AirSense™ 10 leggere per intero la relativa guida all'uso.

Configurazione




Collocare l'apparecchio su una superficie piana e stabile.



Collegare il connettore di alimentazione sul retro dell'apparecchio. Collegare un'estremità del cavo di alimentazione nell'alimentatore e l'altra estremità nella presa di corrente.



Collegare saldamente il circuito respiratorio all'uscita dell'aria ubicata sul retro dell'apparecchio.

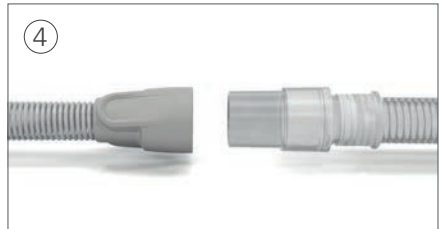

Collegare saldamente l'estremità libera del circuito respiratorio alla maschera assemblata. Premere Start/Stop per avviare la terapia.

AirSense 10 con HumidAir

In caso di un apparecchio AirSense 10 con HumidAir™, riempire l'umidificatore secondo la procedura seguente:



Aprire l'umidificatore e riempirlo di acqua fino alla tacca indicante il livello massimo dell'acqua.



Chiudere l'umidificatore e introdurlo nel lato dell'apparecchio.

L'umidificazione riscaldata offre sollievo da secchezza e congestione ed è stata progettata per rendere la terapia più confortevole. Se l'apparecchio AirSense 10 in uso non dispone di HumidAir, prendere in considerazione l'acquisto di HumidAir e di un circuito respiratorio riscaldato ClimateLineAir™.

Adattarsi alla terapia




Chi utilizza l'apparecchio per la prima volta potrebbe avere bisogno di tempo per abituarsi alla terapia. Non è un fatto insolito dal momento che per la maggior parte dei pazienti sono necessarie da una a due settimane per adattarsi alla pressione dell'aria.

Come superare i sintomi modificando le impostazioni di comfort

In caso di difficoltà ad abituarsi alla terapia, utilizzare le funzioni di comfort dell'apparecchio AirSense 10 per facilitare il percorso verso un sonno migliore.

- **Difficoltà ad addormentarsi**—In caso di difficoltà ad addormentarsi con una pressione elevata, attivare la funzione Auto Ramp o aumentare il parametro T. rampa.
- **Sensazione di distensione addominale**—Qualora si percepisca una sensazione di leggera distensione addominale dovuta all'aria ingerita, attivare la funzione Auto Ramp o aumentare il parametro T. rampa.
- **Sensazione di non ricevere aria a sufficienza**—Quando si prova la sensazione di non ricevere sufficiente aria, disattivare il parametro T. rampa.

Per modificare il parametro T. rampa:

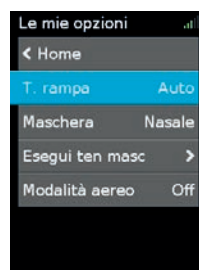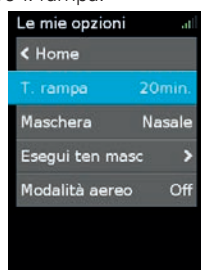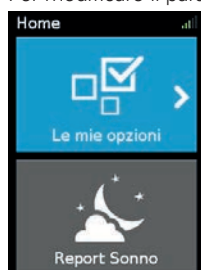

1. Premere il selettore per inserire Le mie opzioni.
2. Ruotare il selettore per evidenziare T. rampa, quindi premere per selezionare.
3. Ruotare il selettore per regolare l'impostazione desiderata.
4. Premere il selettore per salvare la modifica.

L'apparecchio AirSense 10 con HumidAir dispone di un maggior numero di funzioni di comfort che rendono la terapia più confortevole.

- **Naso secco**—Se il naso si secca, regolare il parametro Livello Umidità aumentandolo.
- **Naso che cola**—Se il naso cola, regolare il parametro Livello Umidità diminuendolo.



ResMed

Pulizia

1. Lavare il circuito respiratorio in acqua tiepida usando un detergente delicato. Non lavarli in lavatrice o lavastoviglie.
2. Sciacquare bene il circuito respiratorio e lasciarlo asciugare al riparo dalla luce solare diretta e/o dal calore.
3. Pulire l'esterno dell'apparecchio con un panno asciutto.

In caso di un apparecchio AirSense 10 con HumidAir, pulire l'umidificatore come indicato ai punti 1 e 2.

Per istruzioni dettagliate sulla pulizia della maschera, consultare la guida all'uso della maschera.

Controllo e sostituzione regolare dei componenti

Ai fini del comfort e della sicurezza sanitaria è necessario controllare e sostituire regolarmente i componenti dell'apparecchio e le forniture. La sostituzione su base regolare di componenti e forniture garantisce l'erogazione di una terapia ottimale e il comfort costante.

Per istruzioni dettagliate sui controlli da effettuare, consultare la guida all'uso dell'apparecchio AirSense 10. Contattare il proprio fornitore di apparecchiature medicali per informazioni sulla tempistica delle sostituzioni.

Registrazione dell'apparecchio

Registrando l'apparecchio AirSense 10 sul sito www.resmed.com/register è possibile entrare a far parte della nostra community sull'apnea del sonno.

Numero di serie	Numero dell'apparecchio
Tipo e misura della maschera	Data di configurazione
Note	

 **ResMed Ltd**
1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista
NSW 2153 Australia

DISTRIBUITO DA
ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA
 ResMed (UK) Ltd 96 Jubilee Ave Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RW Regno Unito

Vedere www.resmed.com per le altri sedi ResMed internazionali. AirSense, ClimateLine, e HumidAir sono marchi di fabbrica di ResMed Ltd. ClimateLine è registrato presso l'ufficio marchi e brevetti statunitense. Per informazioni sui brevetti, visitare il sito www.resmed.com/ip. © 2014 ResMed Ltd. 378329/1 2014-06



ResMed.com



378329