

Desinfiointiohje

Vain hoitohenkilökunnan käyttöön


Tämä ohje on tarkoitettu käytettäväksi silloin, kun AirFit F30 -kokokasvomaskia käytetään toistuvasti useammalla potilaalla uniklinikalla, hoitolaitoksessa tai sairaalassa. Jos maskia käyttää yksi ja sama henkilö kotona, on noudatettava maskin käyttöohjeessa olevia puhdistusohjeita. Tässä ohjeessa kuvataan ResMedin suosittelemia ja validoimia ISO 17664 -standardin mukaisia maskien puhdistus- ja desinfiointimenetelmiä.

AirFit F30 -maskin osa ¹	Puhdistus – Alconox		Käsittelykertojen validoitu määrä ²
	Lämpödesinfiointi – Manuaalinen 90 °C – 1 minuutti	Lämpödesinfiointi – Manuaalinen 93 °C – 10 minuuttia	
• Pehmike	✓	–	30
• Vakiokulmakappale	✓	–	30
• QuietAir-kulmakappale ³	–	–	–
• Runko-osa	✓	–	30
• Pääremmit	–	✓	30

¹ Tätä maskia ei ehkä ole saatavissa kaikissa maissa. Perusteelliset tiedot tämän maskin oikeanlaisesta käytöstä käyvät ilmi sen käyttöohjeesta. Luettelo kutakin maskia varten saatavissa olevista varaosista löytyy tuoteoppaasta osoitteesta Resmed.com.

² Jos hoitolaitoksessa vaaditaan ylimääräinen desinfiointijakso maskin kokoamisen jälkeen, validoitujen käsittelykertojen lukumäärä on puolitettava.

³ Vaihda nämä osat uusiin toista potilasta varten.

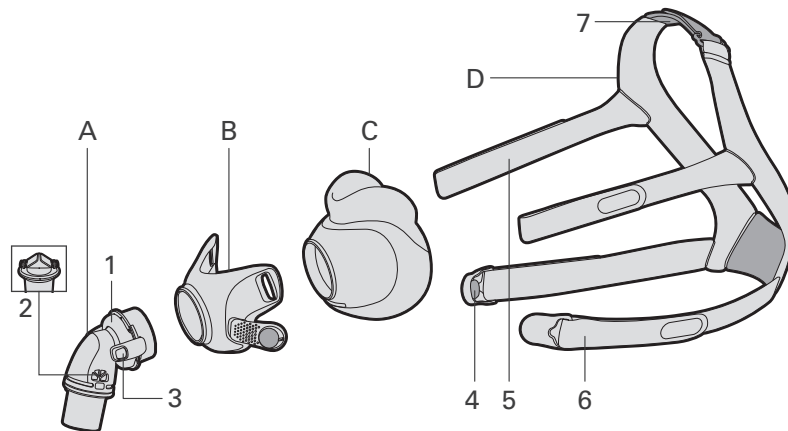

- A Kulmakappale
- B Runko-osa
- C Pehmike
- D Pääremmit
- 1 Poistoilma-aukko
- 2 Antiasfyksiaventtiili
- 3 Sivupainikkeet
- 4 Magneettikiinnikkeet
- 5 Pääremmien ylähihna
- 6 Pääremmien alahihna
- 7 Päälaen hihna

Lämpödesinfiointimenetelmä

1. Maskin purkaminen	Pura maski osiin käyttöohjeessa olevien ohjeiden mukaisesti.																																																			
2. Puhdistus	<p>Pehmike / runko-osa / pääremmit / vakiokulmakappale (puhdistus käsin):</p> <p>1. Huuhdo maskin runko-osaa ja vakiokulmakappaletta juoksevalla vedellä¹ seuraavasti.</p> <table border="1" data-bbox="436 261 1207 324"> <tr> <td>• Runko-osa</td> <td>20–25 °C</td> <td>Huuhtelu 1 minuutti.</td> </tr> <tr> <td>• Vakiokulmakappale</td> <td>15–25 °C</td> <td>Huuhtelu 1 minuutti.</td> </tr> </table> <p>2. Liota maskin osia seuraavasti. Varmista, ettei osiin muodostu ilmakuplia.</p> <table border="1" data-bbox="436 354 1787 477"> <tr> <td>• Pehmike</td> <td>1–2-prosenttinen Alconox-liuos</td> <td>20–25 °C</td> <td>Liotus 1 minuutti.</td> </tr> <tr> <td>• Runko-osa</td> <td>1–2-prosenttinen Alconox-liuos</td> <td>35–40 °C</td> <td>Liota 5 minuuttia ja ravistele sitten reippaasti vielä toiset 5 minuuttia.</td> </tr> <tr> <td>• Pääremmit</td> <td>1–2-prosenttinen Alconox-liuos</td> <td>20–30 °C</td> <td>Liotus 3 minuuttia.</td> </tr> <tr> <td>• Vakiokulmakappale</td> <td>1,5–2-prosenttinen Alconox-liuos</td> <td>40–50 °C</td> <td>Liota 5 minuuttia ja ravistele sitten reippaasti vielä 3 minuuttia.</td> </tr> </table> <p>3. Anna osien olla liotuksen jälkeen liuoksessa ja puhdista niiden sisä- ja ulkopinnat pehmeällä harjalla seuraavasti. Ole erityisen huolellinen kaikkien kolojen ja onteloiden puhdistamisessa.</p> <table border="1" data-bbox="436 506 1367 630"> <tr> <td>• Pehmike</td> <td>Puhdistus 1 minuutti.</td> </tr> <tr> <td>• Runko-osa</td> <td>Puhdistus 1 minuutti.</td> </tr> <tr> <td>• Pääremmit</td> <td>Puhdistus 2 minuuttia. Purista sen jälkeen pääremmeistä pois ylimääräinen liuos.</td> </tr> <tr> <td>• Vakiokulmakappale</td> <td>Puhdistus 1 minuutti.</td> </tr> </table> <p>4. Huuhtelee osia vedessä¹ seuraavasti.</p> <table border="1" data-bbox="436 659 1766 753"> <tr> <td>• Pehmike</td> <td>5 litraa</td> <td>13–18 °C</td> <td>Ravistele reippaasti 1 minuutin ajan ja toista sitten vielä kerran.</td> </tr> <tr> <td>• Runko-osa</td> <td>5 litraa</td> <td>15–20 °C</td> <td>Ravistele reippaasti 1 minuutin ajan.</td> </tr> <tr> <td>• Vakiokulmakappale</td> <td>5 litraa</td> <td>15–25 °C</td> <td>Ravistele reippaasti 1 minuutin ajan.</td> </tr> </table> <p>5. Huuhtelee osia juoksevalla vedellä¹ seuraavasti.</p> <table border="1" data-bbox="436 782 1493 875"> <tr> <td>• Runko-osa</td> <td>20–25 °C</td> <td>Huuhtelu 1 minuutti.</td> </tr> <tr> <td>• Pääremmit</td> <td>20–25 °C</td> <td>Puristele 90 sekunnin ajan.</td> </tr> <tr> <td>• Vakiokulmakappale</td> <td>15–25 °C</td> <td>Huuhtelu 1 minuutti. Ravista sen jälkeen pois ylimääräinen vesi.</td> </tr> </table> <p>Vakiokulmakappale (ultraäänikylpy):</p> <p>1. Huuhdo ja puhdista vakiokulmakappaletta pehmeällä harjalla 1 minuutin ajan juoksevan 20–30-asteisen veden¹ alla. Ole erityisen huolellinen kaikkien kolojen ja onteloiden kanssa ja kääntele liikkuvia osia.</p> <p>2. Täytä kaksi kolmasosaa ultraäänipuhdistimen tilavuudesta 1-prosenttisella Alconox-liuoksella, jonka lämpötila on 20–30 °C, ja käsittele vakiokulmakappaletta laitteessa 20 minuutin ajan. Varmista, että vakiokulmakappale on täysin liuoksen peitossa. Käytä koria/alustaa estääksesi vakiokulmakappaletta joutumasta kosketuksiin säiliön kanssa.</p> <p>3. Huuhdo vakiokulmakappale ravistelemalla sitä reippaasti 5 litrassa 20–30-asteista vettä¹ 1 minuutin ajan. Toista vielä kerran.</p>	• Runko-osa	20–25 °C	Huuhtelu 1 minuutti.	• Vakiokulmakappale	15–25 °C	Huuhtelu 1 minuutti.	• Pehmike	1–2-prosenttinen Alconox-liuos	20–25 °C	Liotus 1 minuutti.	• Runko-osa	1–2-prosenttinen Alconox-liuos	35–40 °C	Liota 5 minuuttia ja ravistele sitten reippaasti vielä toiset 5 minuuttia.	• Pääremmit	1–2-prosenttinen Alconox-liuos	20–30 °C	Liotus 3 minuuttia.	• Vakiokulmakappale	1,5–2-prosenttinen Alconox-liuos	40–50 °C	Liota 5 minuuttia ja ravistele sitten reippaasti vielä 3 minuuttia.	• Pehmike	Puhdistus 1 minuutti.	• Runko-osa	Puhdistus 1 minuutti.	• Pääremmit	Puhdistus 2 minuuttia. Purista sen jälkeen pääremmeistä pois ylimääräinen liuos.	• Vakiokulmakappale	Puhdistus 1 minuutti.	• Pehmike	5 litraa	13–18 °C	Ravistele reippaasti 1 minuutin ajan ja toista sitten vielä kerran.	• Runko-osa	5 litraa	15–20 °C	Ravistele reippaasti 1 minuutin ajan.	• Vakiokulmakappale	5 litraa	15–25 °C	Ravistele reippaasti 1 minuutin ajan.	• Runko-osa	20–25 °C	Huuhtelu 1 minuutti.	• Pääremmit	20–25 °C	Puristele 90 sekunnin ajan.	• Vakiokulmakappale	15–25 °C	Huuhtelu 1 minuutti. Ravista sen jälkeen pois ylimääräinen vesi.
• Runko-osa	20–25 °C	Huuhtelu 1 minuutti.																																																		
• Vakiokulmakappale	15–25 °C	Huuhtelu 1 minuutti.																																																		
• Pehmike	1–2-prosenttinen Alconox-liuos	20–25 °C	Liotus 1 minuutti.																																																	
• Runko-osa	1–2-prosenttinen Alconox-liuos	35–40 °C	Liota 5 minuuttia ja ravistele sitten reippaasti vielä toiset 5 minuuttia.																																																	
• Pääremmit	1–2-prosenttinen Alconox-liuos	20–30 °C	Liotus 3 minuuttia.																																																	
• Vakiokulmakappale	1,5–2-prosenttinen Alconox-liuos	40–50 °C	Liota 5 minuuttia ja ravistele sitten reippaasti vielä 3 minuuttia.																																																	
• Pehmike	Puhdistus 1 minuutti.																																																			
• Runko-osa	Puhdistus 1 minuutti.																																																			
• Pääremmit	Puhdistus 2 minuuttia. Purista sen jälkeen pääremmeistä pois ylimääräinen liuos.																																																			
• Vakiokulmakappale	Puhdistus 1 minuutti.																																																			
• Pehmike	5 litraa	13–18 °C	Ravistele reippaasti 1 minuutin ajan ja toista sitten vielä kerran.																																																	
• Runko-osa	5 litraa	15–20 °C	Ravistele reippaasti 1 minuutin ajan.																																																	
• Vakiokulmakappale	5 litraa	15–25 °C	Ravistele reippaasti 1 minuutin ajan.																																																	
• Runko-osa	20–25 °C	Huuhtelu 1 minuutti.																																																		
• Pääremmit	20–25 °C	Puristele 90 sekunnin ajan.																																																		
• Vakiokulmakappale	15–25 °C	Huuhtelu 1 minuutti. Ravista sen jälkeen pois ylimääräinen vesi.																																																		
3. Tarkastus ja kuivaus	<p>1. Tarkasta ja toista pesu tarvittaessa, kunnes osat näyttävät puhtailta.²</p> <p>2. Purista pääremmeistä pois ylimääräinen vesi.</p> <p>3. Anna maskin osien kuivua suoralta auringonvalolta suojattuina.³</p>																																																			
4. Desinfiointi ja kuivaus	<p>1. Liota maskin osia kuumassa vesikylvyssä¹ seuraavia lämpötila/aika-yhdistelmiä käyttäen. Varmista, ettei osiin muodostu ilmakuplia.</p> <table border="1" data-bbox="436 1177 1178 1240"> <tr> <td>• Pehmike / runko-osa / vakiokulmakappale</td> <td>90 °C</td> <td>Liotus 1 minuutti</td> </tr> <tr> <td>• Pääremmit</td> <td>93 °C</td> <td>Liotus 10 minuuttia</td> </tr> </table> <p>2. Purista pääremmeistä pois ylimääräinen vesi.</p> <p>3. Anna maskin osien kuivua suoralta auringonvalolta suojattuina.</p>	• Pehmike / runko-osa / vakiokulmakappale	90 °C	Liotus 1 minuutti	• Pääremmit	93 °C	Liotus 10 minuuttia																																													
• Pehmike / runko-osa / vakiokulmakappale	90 °C	Liotus 1 minuutti																																																		
• Pääremmit	93 °C	Liotus 10 minuuttia																																																		
5. Tarkastus	Tarkasta maskin kaikki osat silmämääräisesti. Jos maskin osissa näkyy selviä vaurioita (halkeamia, säröjä, murtumia tms.), rikkinäinen osa on poistettava käytöstä ja korvattava uudella. Silikoniosien väri voi muuttua hieman, mutta se on hyväksyttävää.																																																			
6. Maskin kokoaminen	Kokoa maski käyttöohjeessa olevien ohjeiden mukaisesti.																																																			
7. Pakkaus ja säilytys	Säilytä kuivassa, pölyttömässä ympäristössä suoralta auringonvalolta suojattuina. Säilytyslämpötila: -20–60 °C																																																			

¹ Käytä kaikissa puhdistus-, huuhtelu- ja desinfiointivaiheissa juomavedeksi kelpaavaa vettä.

² Jos maskin osaa ei puhdisteta ohjeiden mukaisesti, osan desinfiointi voi jäädä riittämättömäksi.

³ Kuivausta ei tarvita, jos lämpödesinfiointi suoritetaan välittömästi.



YLEISET VAROITUKSET JA HUOMIOITAVAT SEIKAT

- ResMed ei pysty takaamaan, että poikkeamiset tämän ohjeen menetelmistä (esim. käsittelykertojen määrän ylittäminen) ja niiden vaikutus tuotteen käyttöominaisuuksiin tai turvallisuuteen voidaan hyväksyä.
- Maskin osia ei saa steriloida autoklaavissa tai eteenioksidikaasulla.
- Noudata puhdistus- tai desinfiointiaineita käyttäessäsi aina niiden valmistajan antamia ohjeita. Jos ohjeet ovat ristiriitaisia, noudata ensisijaisesti tätä ohjetta.
- Älä silitä pääremmejä silitysrudalla, koska kuumuus vahingoittaa niiden materiaalia.