



Lumis™ series

VPAP S

VPAP ST




Läs hela bruksanvisningen för Lumis™ före användning.

Montering



Med apparaten på en stabil, jämn yta, fatta tag i retentionsklämman på apparatens baksida och dra upp för att öppna.

Obs! Retentionsklämman visas i det öppna läget.

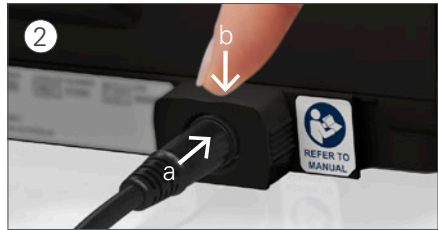


(a) Koppla in elanslutningen i strömintaget på apparaten och därefter (b) tryck ned retentionsklämman för att säkra på plats.

Anslut den ena änden av nätsladden till nätadaptern och den andra till eluttaget.



Anslut luftslangen ordentligt till luftutsläppet på apparatens baksida.

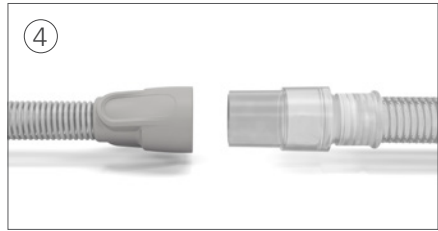

Anslut luftslangens fria ände ordentligt till den monterade masken. Tryck på Start/ Stopp-knappen för att starta behandlingen.

Lumis med HumidAir

Om du har en Lumis-apparat med HumidAir™ ska du fylla på befuktaren på följande sätt:



Öppna befuktaren och fyll den med vatten upp till markeringen för maximal vattennivå.



Stäng befuktaren och sätt in den på apparatens sida.

Uppvärmad befuktning ger lindring av torrhet och tilltäppning och är avsedd att göra behandlingen mer bekväm.

Anpassa dig till behandlingen


Om du är förstagångsanvändare kan det ta lite tid innan du vänjer dig vid behandlingen. Det är inte ovanligt, utan det brukar ta mellan en eller två veckor för de flesta patienter att vänja sig vid lufttrycket.

Lindra symptom genom att ändra komfortinställningarna

Om du har svårt att vänja dig vid behandlingen kan du använda komfortfunktionerna som finns i Lumis.

- **Svårigheter att somna** – Om du har svårt att somna med högt tryck kan du aktivera Ramp eller öka Ramptid.
- **Känsla av uppblåsthet** – Om du upplever en lätt uppblåsthet till följd av att du har svalt luft kan du aktivera Ramp eller öka Ramptid.
- **En känsla av att inte få tillräckligt med luft** – Om du tycker att det känns som att du inte får tillräckligt med luft, stäng av Ramptid.


Gör så här för att ändra Ramptid:

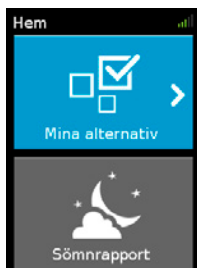


1. Tryck på ratten för att komma till Mina alternativ.



2. Vrid på ratten tills Ramptid är markerat och tryck sedan för att välja detta.

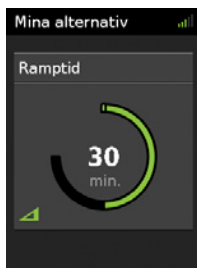

3. Vrid på ratten för att justera till den inställning du föredrar.

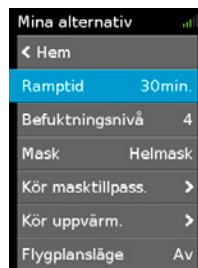

4. Tryck på ratten för att spara ändringen.

Om du har en Lumis-apparat med HumidAir har du flera komfortfunktioner som kan hjälpa dig att göra behandlingen mer behaglig.

- **Torr eller rinnande näsa** – Om din näsa känns torr eller börjar rinna, justera fuktighetsnivån genom att höja den.
- **Vattendroppar (kondens)** – Om vattendroppar bildas på näsan, masken eller luftslangarna, justera fuktighetsnivån genom att sänka den.



ResMed

Rengöring

1. Tvätta luftslangen i varmt vatten och mildt rengöringsmedel.
Tvätta inte i disk- eller tvättmaskin.
2. Skölj luftslangen grundligt och låt den torka skyddad från direkt solljus och/eller värme.
3. Torka av apparatens utsida med en torr trasa.

Om du har en Lumis-apparat med HumidAir, rengör befuktaren enligt steg 1 och 2.

Se användarguiden för masken för detaljerade anvisningar om hur du rengör masken.

Kontrollera och byt ut delarna regelbundet

Det är viktigt för din komfort och hälsa att du kontrollerar och byter ut delar och tillbehör regelbundet. Att byta ut delar och tillbehör regelbundet hjälper till att säkerställa att du får optimal behandling och fortsatt komfort.

Se bruksanvisningen för Lumis för detaljerade anvisningar om hur du kontrollerar din apparat. Kontakta din vårdgivare för mer information.

Serienummer	Apparatnummer
Masktyp och –storlek	Inställningsdatum
Obs!	



ResMed Ltd

1 Elizabeth Macarthur Drive
Bella Vista NSW 2153 Australien

ÅTERFÖRSÄLJARE

ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA
EC REP ResMed (UK) Ltd 96 Jubilee Ave Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RW Storbritannien

Information om andra ResMed kontor hittar du på www.resmed.com. Lumis, ClimateLine och HumidAir är varumärken som tillhör ResMed Ltd. ClimateLine är registrerat hos U.S. Patent and Trademark Office (amerikanska patentverket). För patentinformation, se www.resmed.com/ip. © 2015 ResMed Ltd. 288303/1 2015-03



ResMed.com



288303