

RESMED

S9™ Auto 25

POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE

Information Guide

Svenska

S9 | Series
More Comfort.

Läs igenom både informationsguiden och välkommen-guiden innan du börjar använda din utrustning.

Indikationer

S9 Auto 25 indikeras för behandling av obstruktiv sömnapné (OSA) hos patienter som väger mer än 30 kg. S9 Auto 25 är avsedd för användning i hemmet och på sjukhus.

Kontraindikationer

Övertrycksbehandling kan vara kontraindicerat för vissa patienter som sedan tidigare lider av följande:

- svår bullös lungsjukdom
- pneumotorax eller pneumomediastinum
- patologiskt lågt blodtryck, särskilt i kombination med intravaskulär volymförsämring
- dehydrering
- läckande ryggmärgsvätska, nyligen genomgången skaloperation eller trauma.

Biverkningar

Patienterna ska rapportera ovanlig bröstsmärta, svår huvudvärk eller ökad andfåddhet till sin vårdansvarige läkare. Ett tillfälligt behandlingsuppehåll kan bli nödvändigt vid en akut infektion i de övre luftvägarna.

Följande biverkningar kan uppstå under behandling med utrustningen:

- uttorkning i näsa, mun eller svalg
- näsblod
- svullnad
- obehagskänslor i öra eller sinus
- ögonirritationer
- hudutslag.

Felsökning

Prova följande förslag om problem uppstår. Kontakta utrustningsleverantören eller ResMed om problemet inte kan lösas. Gör inga försök att öppna ytterhöljet på utrustningen.

Problem/möjlig orsak

Lösning

Ingen bild

Ingen ström inkopplad.

Se till att nätsladden är inkopplad och strömuttaget (om sådant finns) är påslaget.

Problem/möjlig orsak	Lösning
DC-kontakten är endast delvis insatt på baksidan av utrustningen eller har satts in alltför långsamt.	Tryck in DC-kontakten helt.
Otillräcklig mängd luft från Auto 25-utrustningen	
Ramptid pågår.	Vänta tills lufttrycket byggts upp eller ändra ramptid.
Luftfiltret är smutsigt.	Byt ut luftfiltret.
Luftslangen är inte korrekt inkopplad.	Kontrollera luftslangen.
Luftslangen är blockerad, hopklämd eller punkterad.	Ta bort hindret eller frigör luftslangen. Se till att slangen inte är punkterad.
Masken och huvudbandet sitter inte korrekt.	Justera maskens och huvudbandets placering.
Du har inte valt korrekt luftslang.	Om du använder SlimLine, Standard eller 3 m luftslang måste du se till att du har valt korrekt luftslang via menyen.
Utrustningen startar inte när du andas in i masken.	
Andetaget är inte djupt nog för att lösa ut SmartStart/Stopp.	Ta ett djupt andetag in och ut genom masken.
Alltför stort läckage.	Justera maskens och huvudbandets placering.
Obs!: Om läckagevarning aktiverats ljuder en ljudsignal och ett meddelande om stort läckage visas.	Luftslangen inte rätt inkopplad. Koppla in den ordentligt i båda ändarna.
SmartStart/Stopp är bortkopplad.	Aktivera SmartStart/Stopp.
Obs!: SmartStart/Stopp är inte tillgängligt om läckvarning aktiverats.	

Problem/möjlig orsak	Lösning
-----------------------------	----------------

Utrustningen stannar inte när du tar bort masken.	
--	--

SmartStart/Stopp är bortkopplad.	Aktivera SmartStart/Stopp.
----------------------------------	----------------------------

Obs!: SmartStart/Stopp är inte tillgängligt om läckvarning aktiverats.

SmartStart/Stopp har aktiverats men utrustningen stannar inte automatiskt när du tar bort masken.	
--	--

Du använder inte ett kompatibelt masksystem.	Använd endast utrustning som rekommenderas av ResMed.
--	---

Patienten använder en näskuddemask med ett inställt tryck som är mindre än 7 cm H ₂ O.	Avaktivera SmartStart/Stopp
---	-----------------------------

Trycket stiger på ett olämpligt sätt.	
--	--

Du pratar, hostar eller andas på ett ovanligt sätt.	När du har på dig en näsmask ska du undvika att prata samt andas så normalt som möjligt.
---	--

Maskens mjukdel vibrerar mot huden.	Justera huvudbandet.
-------------------------------------	----------------------

Mjukdelen sitter fel och orsakar alltför stort läckage.	Justera huvudbandet eller placera om mjukdelen.
---	---

Visar meddelandena: Fel på grund av hög temperatur. Se bruksanvisningen.	
---	--

Utrustningen har legat i en varm miljö.	Låt den svalna innan den används på nytt. Koppla ur nätsladden och koppla sedan in den på nytt för att starta om utrustningen
---	---

Luftfiltret är tilltäppt.	Byt ut ditt luftfilter. Koppla ur nätsladden och koppla sedan in den på nytt för att starta om utrustningen
---------------------------	---

Stopp i luftslangen	Kontrollera luftslangen och ta bort eventuella stopp. Koppla ur nätsladden och koppla sedan in den på nytt för att starta om utrustningen
---------------------	---

Problem/möjlig orsak	Lösning
Befuktarinställningen är för hög och vatten har därför ansamlats inne i luftslangen.	Minska befuktarinställningen och håll bort vattnet från luftslangen.
Visar meddelandena: Kontrollera ResMed 30/90 W-strömförsörjningsenhet. Tryck in kopplingsdonet helt.	
DC-kontakten är endast delvis insatt på baksidan av utrustningen eller har satts in alltför långsamt.	Tryck in DC-kontakten helt.
Du har kopplat in en icke ResMed strömförsörjningsenhet.	Ta bort strömförsörjningsenheten och byt ut den mot en ResMed strömförsörjningsenhet.
Strömförsörjningsenheten är täckt av sängkläder.	Säkerställ att strömförsörjningsenheten är fri från sängkläder, kläder eller andra föremål som skulle kunna täcka över den.
Visar meddelandena: Blockerad slang, kolla slang	
Stopp i luftslangen	Kontrollera luftslangen och ta bort eventuella stopp. Koppla ur nätsladden och koppla sedan in den på nytt för att starta om utrustningen
Visar meddelandena: Hög läcka, kolla systeminstallation och alla kopplingar	
Alltför stort läckage.	Justera maskens och huvudbandets placering. Luftslangen är inte korrekt inkopplad. Koppla in den ordentligt i båda ändarna.
Följande meddelande visas på LCD-skärmen efter det att du försöker uppdatera inställningarna eller kopiera data till SD-kortet: Kortfel, ta bort SD-kort och kontakta serviceleverantören	
SD-kortet inte korrekt insatt.	Se till att SD-kortet är korrekt insatt.

Problem/möjlig orsak	Lösning
Du kan ha tagit bort SD-kortet innan inställningarna hade kopierats över till utrustningen.	Sätt in SD-kortet på nytt och vänta tills du ser hemskärmen eller tills meddelandet "Inställningar har uppdaterats, tryck på valfri knapp" visas på LCD-skärmen. Obs! Det här meddelandet visas bara en gång. Om du sätter in SD-kortet på nytt efter det att inställningarna har uppdaterats, kommer detta meddelande inte att visas igen.

Följande meddelande visas INTE på LCD-skärmen efter det att du försöker uppdatera inställningarna med hjälp av SD-kortet: Inställningarna har uppdaterats. Tryck på valfri knapp

Inställningarna har inte uppdaterats.

Kontakta läkaren/serviceleverantören omedelbart.

Allmänna tekniska specifikationer

Strömförsörjning **90 W strömförsörjningsenhet**

Invärde, intervall: 100–240 V, 50–60 Hz, 115 V, 400 Hz nominellt för användning på flygplan

Typisk energiförbrukning: 70 W (80 VA)

Max. energiförbrukning: 110W (120 VA)

30W strömförsörjningsenhet

Invärde, intervall: 100–240 V, 50–60 Hz, 115 V, 400 Hz nominellt för användning på flygplan

Typisk energiförbrukning: 20W (40 VA)

Max. energiförbrukning: 36W (75 VA)

90 W DC/DC-omvandlare

Nominella invärden: 12 V, 24 V

Typisk energiförbrukning: 70 W

Max. energiförbrukning: 110W

Miljöförhållanden

Drifttemperatur: +5 °C till +35 °C

Obs! Temperaturen på andningsluftflödet från denna apparat kan vara högre än rumstemperaturen. Under extrema omgivande temperaturförhållanden (40 °C) förblir apparaten säker.

Driftfuktighet: 10 till 95 % icke-kondenserande

Driftaltitud: Havsnivå till 2 591 m

Temperatur vid förvaring och transport: -20 °C till +60 °C

Fuktighet vid förvaring och transport: 10 till 95 % icke-kondenserande

Användning på flygplan	ResMed bekräftar att utrustningen/utrustningarna uppfyller kraven från den amerikanska statliga luftfartsmyndigheten FAA (Federal Aviation Administration, RTCA/DO-160, avsnitt 21, kategori M) för alla faser av flygresor.
Elektromagnetisk kompatibilitet	Produkten följer alla tillämpliga elektromagnetiska kompatibilitetskrav (EMC) enligt IEC60601-1-2 för bostads-, kommersiella och lätta industrimiljöer. Vi rekommenderar att mobil kommunikationsutrustningar hålls på ett avstånd av minst 1 m från utrustningen. Information om elektromagnetiska emissioner och immunitet för denna ResMed-utrustning finns på www.resmed.com , på sidan Products (Produkter) under Service & Support . Klicka på PDF-filen för ditt språk.
IEC 60601-1 klassifikation	Klass II (dubbel isolering), Typ BF
Tekniska specifikationer för Auto 25	
Tryck- och flödesstatus	Driftryckområde (mätt vid masken): 4-20 cm H ₂ O (CPAP); 4-25 cm H ₂ O (VPAP) Max. stationärt driftryck vid enkelfel: 30 cm H ₂ O - om trycket överskrids i >6s; 40 cm H ₂ O - om trycket överskrids i >1 s; Tryckmätning, avvikelse: ±0,5 cm H ₂ O ± 4 % av uppmätt avläsning Flödesmätning, avvikelse: ±6 l/min eller 10 % av det avlästa värdet, beroende på vilket värde som är högst, vid 0 till 150 l/min positivt flöde
Funktionsavläsning	CPAP-funktion Inställt tryck: 4 till 20 cm H ₂ O VAuto-funktion Min EPAP: 4 cm H ₂ O, Max IPAP: 25 cm H ₂ O, Tryckstöd: 0 till 10 cm H ₂ O.
Fysiska dimensioner	Nominella mått (L x B x H): 153 mm x 140 mm x 86 mm Vikt: 835 g Ytterhöljets konstruktion: Flamsäker teknisk termoplast Luftutsläpp: 22 mm koniskt luftutsläpp (överensstämmer med ISO 5356-1:2004)
Luftfilter	Hypoallergeniskt luftfilter: Akryl- och polypropylenfibrer i en polypropylenbärande Standard luftfilter: non-woven polyesterfibrer

Ljud DEKLARERADE VÄRDEPAR FÖR LJUDEFFEKTIVÅÄR i överensstämmelse med ISO 4871:1996	Trycknivå (CPAP-funktion)	
	Med SlimLine luftslang:	26 dBA med osäkerhet på 2 dBA uppmätt enligt EN ISO 17510-1:2009
	Med Standard luftslang:	27 dBA med osäkerhet på 2 dBA uppmätt enligt EN ISO 17510-1:2009
	Med antingen SlimLine eller Standard luftslang och H5i:	28 dBA med osäkerhet på 2 dBA uppmätt enligt EN ISO 17510-1:2009
	Effektnivå (CPAP-funktion)	
	Med SlimLine luftslang:	34 dBA med osäkerhet på 2 dBA uppmätt enligt EN ISO 17510-1:2009
	Med Standard luftslang:	35 dBA med osäkerhet på 2 dBA uppmätt enligt EN ISO 17510-1:2009
	Med antingen SlimLine eller Standard luftslang och H5i:	36 dBA med osäkerhet på 2 dBA uppmätt enligt EN ISO 17510-1:2009
Tilläggsyre	Rekommenderat max. flöde för tilläggsyre: 4 l/min	

Luftslangens tekniska specifikationer

Luftslang	Material	Längd	Innerdiameter
ClimateLine-luftslang med uppvärmningsfunktion	Böjliga plast- och elkomponenter	2 m	15 mm
ClimateLine ^{MAX} -luftslang med uppvärmningsfunktion	Böjliga plast- och elkomponenter	1,9 m	19 mm
SlimLine luftslang	Böjlig plast	1,8 m	15 mm
Standard luftslang	Böjlig plast	2 m	19 mm
3 m luftslang	Böjlig plast	3 m	19 mm

Temperaturfrånslagning för luftslang med uppvärmningsfunktion ≤ 41 °C

Obs!

- *Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra dessa specifikationer utan varsel.*
- *Inställningarna för temperatur och relativ fuktighet som visas för Climate Control är inte uppmätta värden.*

- Rådfråga din läkare/tjänsteleverantör innan du använder SlimLine-luftslangen med andra utrusningar än S9 eller H5i.
- Elanslutningsändan på luftslangen med uppvärmningsfunktion är bara kompatibel med H5i-luftutsläppet och får inte anslutas till utrustningen eller masken.

Befuktarens prestanda


Följande inställningar har testats vid en omgivningstemperatur på 22 °C:

Masktryck cm H ₂ O	RH uteffekt %		Nominell uteffekt från systemet AH ^a , BTPS ^b	
	Inställning 3	Inställning 6	Inställning 3	Inställning 6
3	90	100	10	18
10	95	100	11,5	21
20	95	100	11	18
25	100	100	12	13,5

a. AH - absolut fuktighet i mg/l.

b. BTPS - Body Temperature Pressure Saturated.

Pneumatisk flödesväg

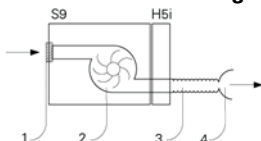

1. Inloppsfilter
2. Turbin
3. Luftslang
4. Mask

Flöde (maximalt) vid tryckbörvärden

Följande värden uppmäts vid den angivna luftslangens ände:

Tryck, cm H ₂ O	Auto 25 och Standard luftslang, l/min	Auto 25, H5i och Standard luftslang, l/min	Auto 25 och SlimLine luftslang, l/min	Auto 25, H5i och ClimateLine uppvärmd luftslang, l/min
4	200	170	195	170
8	200	170	190	170
12	200	170	184	170
16	200	170	175	170
20	190	170	168	161
25	180	161	144	125

Visade värden

Värde	Område	Noggrannhet	Skärmupplösning
Tryckgivare vid luftutloppet			
Tryck	4 till 25 cm H ₂ O	±0,5 cm H ₂ O (± 4 % av uppmätt avläsning)	0,1 cm H ₂ O
Värden härledda från flödet^a			
Läckage	0–200 l/min	^b	1 l/min
Tidalvolym	0-4000 ml	±10 %	1 ml
Andningsfrekvens	0-50 BPM	±1 BPM ^c	1 BPM
Minutventilation	0–30 l/min	±10 %	0,1 l/min
Ti medel	0-4,0 s	±10 %	0,2 s

a. Resultaten kan bli inkorrekta i händelse av läckage eller tillförsel av extra syrgas.

b. De värden som visas är uppskattade värden. De anges endast för att visa trenden.

c. Resultaten kan vara felaktiga om tidalvolymen är under 50 ml.

Trycknoggrannhet

Max. variation av statiskt tryck vid 10 cm H₂O enligt EN ISO 17510-1:2009

	Standard luftslang	SlimLine luftslang
Utan H5i	9,89 cm H ₂ O till 9,97 cm H ₂ O	9,76 cm H ₂ O till 9,87 cm H ₂ O
Med H5i	9,82 cm H ₂ O till 9,98 cm H ₂ O	9,78 cm H ₂ O till 9,88 cm H ₂ O





Max. variation av dynamiskt tryck enligt EN ISO 17510-1:2009





Tryck (cm H ₂ O)	10 BPM	15 BPM	20 BPM
	Auto 25 och Standard luftslang utan H5i/Auto 25 och Standard luftslang med H5i		
4	0,18 / 0,18	0,30 / 0,30	0,51 / 0,51
8	0,21 / 0,20	0,26 / 0,24	0,38 / 0,36
12	0,21 / 0,20	0,26 / 0,23	0,34 / 0,31
16	0,22 / 0,21	0,27 / 0,26	0,36 / 0,33
20	0,23 / 0,22	0,26 / 0,28	0,38 / 0,35
25	0,30 / 0,31	0,54 / 0,50	0,74 / 0,71


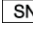
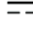


Tryck (cm H ₂ O)	10 BPM	15 BPM	20 BPM
	Auto 25 och SlimLine luftslang utan H5i/Auto 25 och SlimLine luftslang med H5i		
4	0,22 / 0,20	0,28 / 0,29	0,47 / 0,53
8	0,23 / 0,19	0,32 / 0,29	0,41 / 0,42
12	0,22 / 0,21	0,35 / 0,29	0,41 / 0,45
16	0,22 / 0,23	0,41 / 0,33	0,44 / 0,50
20	0,24 / 0,27	0,37 / 0,34	0,48 / 0,50
25	0,31 / 0,31	0,50 / 0,54	0,78 / 0,84




Symboler

Följande symboler kan finnas på din produkt eller på förpackningen.

 SE UPP!;  Läs anvisningarna före användning; **IP21** Skydd mot införande av fingrar och mot vertikalt droppande vatten; **IP20** Inte droppsäker;  Typ BF-utrustning;  Utrustning, klass II;

 Start/Stopp;  Tillverkare;  RoHS Direktiv 2002/95/EG (RoHS);  LOT Partinummer;

 Katalognummer;  Serienummer;  --- Likström (DC);  Lås/lås upp;  Logo 1 för Kinas RoHS;

  Logo 2 för Kinas RoHS;  Auktoriserad representant i Europa;

 Förvaras torrt;

Miljöinformation

Direktiv 2002/96/EG (WEEE) är ett europeiskt direktiv som kräver att elektrisk och elektronisk utrustning avfallshanteras på ett korrekt sätt. Utrustningen måste bortskaftas separat och inte som osorterat kommunalt avfall. Vid bortskaftning av produkten bör du använda tillämpliga system för uppsamling, återanvändning och återvinning som finns i den region där du är bosatt. Sådana system för uppsamling, återanvändning och återvinning är avsedda att skona naturresurser och förhindra att farliga ämnen skadar miljön.

Om du behöver information om dessa avfallshanteringssystem, kontakta lokal myndighet ansvarig för avfallshantering. Symbolen, en överkryssad soptunna, uppmanar dig att använda dessa avfallssystem. Om du behöver information om uppsamling och avfallshantering av din ResMed-utrustning är du välkommen att kontakta ett ResMed-kontor eller den lokala återförsäljaren. Du kan också gå in på www.resmed.com/environment.

Service

Auto 25-utrustningen är avsedd att fungera på ett säkert och pålitlig sätt under förutsättning att den används enligt de anvisningar som tillhandahålls av ResMed. ResMed rekommenderar att Auto 25-utrustningen inspekteras och genomgår service av ett auktoriserat ResMed servicecenter om det finns tecken på förslitning eller om man är tveksam om utrustningfunktionen. Annars är service och besiktning av utrustningen i allmänhet inte nödvändig under utrustningens avsedda livslängd på fem år.

Begränsad garanti

ResMed Ltd (härefter kallat ResMed) garanterar att din ResMed-produkt är felfri med avseende på material och utförande från och med inköpsdagen för nedan angivna tidsperiod.

Produkt	Garantiperiod
<ul style="list-style-type: none">• Masksystem (inkl. maskram, mjukdel, huvudband och slangar), med undantag för apparater avsedda för engångsbruk• Tillbehör, med undantag för apparater avsedda för engångsbruk• Fingerpulssensorer av Flex-typ• Vattenbehållare för befuktare	90 dagar
<ul style="list-style-type: none">• Batterier för användning i ResMeds interna och externa batterisystem	6 månader
<ul style="list-style-type: none">• Clip-typ fingerpulssensorer• Datamoduler för CPAP- och apparater med tvånivåfunktion• Oximetrar och oximeteradaptorer för CPAP- och apparater med tvånivåfunktion• Befuktare och tvättbara vattenbehållare för befuktare• Titreringskontrollapparater	1 år
<ul style="list-style-type: none">• CPAP-, tvånivåfunktions- och ventilationsapparater (inkl. externa strömförsörjningsenheter)• Batteritillbehör• Bärbara apparater för diagnostik/screening	2 år

Denna garanti gäller endast för den ursprungliga köparen. Den kan inte överföras.

Om produkten visar sig vara bristfällig under normala användningsförhållanden, kommer ResMed att efter eget gottfinnande reparera eller byta ut den defekta produkten eller delar av produkten.

Denna begränsade garanti täcker inte: a) skador som uppstår till följd av otillbörlig användning,

missbruk, modifiering eller ändring av produkten; b) reparationer som utförts av andra serviceinrättningar som inte uttryckligen har godkänts av ResMed att utföra sådana reparationer, c) eventuell skada eller kontamination som uppstår till följd av cigarett-, pip-, cigarrök eller annan form av rök; samt d) skador orsakade av att vatten spillts på eller inuti en elektronisk apparat.

Garantin ogiltigförklaras om produkten säljs eller säljs på nytt utanför det område där den ursprungligen inköptes.

Garantianspråk på defekt produkt måste lämnas av den ursprungliga köparen på inköpsstället.

Denna garanti ersätter alla andra uttryckliga eller underförstådda garantier, inkl. underförstådd garanti beträffande säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. Vissa områden eller länder tillåter inte tidsbegränsningar för en underförstådd garanti och ovanstående begränsning kan av denna anledning eventuellt inte komma att beröra dig.

ResMed ska inte hållas ansvarigt för några indirekta skador eller följdskador som uppges ha inträffat till följd av försäljning, installation eller användning av ResMed produkter. Vissa områden eller länder tillåter inte undantag eller begränsning av indirekta skador eller följdskador och ovanstående begränsning kan av denna anledning eventuellt inte komma att beröra dig.

Denna garanti ger dig bestämda juridiska rättigheter och du kan eventuellt också ha andra rättigheter som kan variera från land till land. För mer information om dina rättigheter enligt garantin, var god kontakta närmaste ResMed-leverantör eller ResMed-kontor.



VARNINGAR

- Läs hela bruksanvisningen innan du använder apparaten.
- Utrustningen ska endast användas på det sätt som föreskrivs av din läkare eller vårdleverantör.
- Använd utrustningen endast för den avsedda användning som beskrivs i den här manualen. De råd som ges i bruksanvisningen ska inte ersätta anvisningar från vårdansvarig läkare.
- Om du upptäcker oförklarliga förändringar av utrustningens prestanda, om den ger ifrån sig ovanliga eller skarpa ljud, om utrustningen eller strömförsörjningsenheten tappas eller hanteras felaktigt, om vatten spills inuti utrustningens hölje eller om höljat är trasigt ska du sluta att använda utrustningen och kontakta ditt ResMed-servicecenter.
- Se upp för elektriska stötar. Sänk ej ned utrustningen, befuktaren, strömförsörjningen eller strömsladden i vatten. I händelse av spill, frångör utrustningen från strömförsörjningen och låt delarna torka. Frångör utrustningen före rengöring och säkerställ att alla delar är torra innan utrustningen kopplas på.
- Explosionsrisk – använd inte utrustningen i närheten av antändliga narkosmedel.
- Se till att nätsladden och stickkontakten är i gott skick och att det inte finns några skador på utrustningen.

- Se till att hålla nätsladden borta från varma ytor.
 - Denna utrustning bör endast användas med de maskor (och kopplingsdon¹) som rekommenderas av ResMed eller av en läkare eller andningsterapeut. En mask bör inte användas om inte utrustningen är påkopplad. När masken sitter på plats ska du säkerställa att utrustningen blåser luft. Ventilöppningen/öppningarna i masken får aldrig blockeras.
- Förklaring:** Denna utrustning är avsedd att användas med speciella maskor (eller kopplingsdon) som är försedda med ventilöppningar som möjliggör ett kontinuerligt luftflöde ut från masken. När utrustningen är påslagen och fungerar korrekt kommer ny luft från utrustningen att driva ut redan utandad luft genom maskens ventilöppningar. När utrustningen däremot inte är i drift, kommer en otillräcklig mängd ny luft att tillföras genom masken och den utandade luften kan komma att andas på nytt. Återandning av utandad luft under längre tid än ett par minuter kan under vissa omständigheter leda till kvävning. Detta gäller för de flesta modeller av CPAP- eller bilevel-utrustningar.
- Syrgas underhåller förbränning. Syrgas får inte användas i samband med rökning eller i närvaro av öppna lågor.
 - Säkerställ alltid att utrustningen är på och att luftflöde genereras innan syrgastillförseln kopplas in. Stäng alltid av syrgastillförseln innan utrustningen stängs av, så att inte oanvänd syrgas ackumuleras inom utrustningsområdet och skapar en brandrisk.
 - Lämna inte långa delar luftslang runt sängens huvudända. Slangen kan slingra sig runt huvudet eller nacken medan du sover.
 - Använd inte elektriskt ledande eller antistatiska luftslangar.
 - Använd inte luftslangen om det finns några synliga tecken på skada.
 - Endast luftslangar och tillbehör från ResMed ska användas tillsammans med utrustningen. Andra luftslangstyper eller tillbehör kan förändra det tryck du faktiskt erhåller och därigenom göra behandlingen mindre effektiv.
 - Använd endast ResMed 90 W eller 30 W strömförsörjningsenhet. Använd strömförsörjningsenheten på 90 W för att ge ström till systemet som omfattar utrustningen, H5i, luftslang, DC/DC-omvandlare och batterienhet. 30 W strömförsörjningsenheten är avsedd att ge ström till utrustningen enbart, och rekommenderas vid resor.
 - Endast ResMed-produkter är utformade för att kopplas till modulkopplingsporten. Anslutning av andra enheter kan skada utrustningen.
 - Om utrustningens luftslang och/eller luftintag blockeras under användningen kan det leda till att utrustningen överhettas.

¹ Portar kan vara inbyggda i masken eller i kopplingsdon nära masken.



FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Öppna inte utrustningens hölje. Det finns inga delar som användaren själv kan reparera. Reparationer och service ska endast utföras av servicerepresentant auktoriserad av ResMed.
- Använd inte blekmedel, klorin, alkohol eller aromatiska lösningar, fuktighetsbevarande eller bakteriedödande tvålar eller parfymerade oljor när du rengör utrustningen, befuktaren eller luftslangen. Sådana lösningar kan orsaka skada på dessa produkter samt minska deras livslängd.
- Inkorrekt systeminställning kan leda till felaktig avläsning av masktryck. Säkerställ att systemet är korrekt inställt.
- Placera inte utrustningen på ett ställe där den kan stötas till eller där man lätt kan snubbla på nätsladden.
- Säkerställ att området runt utrustningen är torrt och rent samt fritt från sängkläder, kläder eller andra föremål som kan blockera luftintaget eller täcka över strömförsörjningsenheten.
- Säkerställ att utrustningen är skyddad mot vatten om den används utomhus. Inneslut utrustningen i S9-transportväskan vid förflyttning.



Manufacturer: ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia.

See www.resmed.com for other ResMed locations worldwide.

For patent information, see www.resmed.com/ip.

S9, H5i, ClimateLine, SlimLine and SmartStart are trademarks of ResMed Ltd. S9, ClimateLine, SlimLine and SmartStart are registered in U.S. Patent and Trademark Office.

© 2017 ResMed Ltd. 368696/3 2017-11

