



ResMed

AirMini™



Made for
 **iPhone**

R_x Only

Guia do paciente
Português

Avisos legais

Aviso importante

Este manual e os programas de computador nele descritos são fornecidos mediante a condição de que só poderão ser usados de acordo com os fins especificados. As informações neste manual são fornecidas apenas para fins de instrução e orientação, estando sujeitas a alterações sem aviso prévio e não devem ser vistas como uma alternativa para a orientação médica qualificada. A ResMed Limited não assumirá responsabilidades por erros ou imprecisões que porventura apareçam neste manual. Nenhuma parte deste manual ou dos programas de computador aqui descritos podem ser reproduzidos, armazenados em sistemas de recuperação ou transmitidos de qualquer forma e por qualquer meio – eletrônico, mecânico, por gravação ou outros – sem uma permissão por escrito da ResMed Limited.

Este produto utiliza um software desenvolvido pelo projeto ANTLR (<http://www.antlr.org>).

AirMini™ da ResMed App para atribuições da biblioteca do software OTS para iOS™:

O Aplicativo AirMini pode conter componentes de terceiros licenciados para uso e redistribuição de acordo com uma licença de código aberto, conforme descrito a seguir.

- **Apache License, Version 2.0 Encrypted Core Data (v. 2.0):**
<https://github.com/project-imas/encrypted-core-data>
© 2014 iMAS
Licenciado de acordo com a Licença Apache, versão 2.0:
<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>
- **Licença MIT TrustKit (v. 1.4.0):** <https://github.com/datatheorem/TrustKit>
© 2015 Data Theorem, Inc.
Licenciado de acordo com a Licença MIT: <https://opensource.org/licenses/MIT>
- **Software personalizados e outros licenciados de código aberto:**
Os seguintes componentes são licenciados usando contratos personalizados (específicos do fornecedor) de software de código aberto:

Acessibilidade (v. 5.0): <https://developer.apple.com/library/ios/samplecode/Reachability/>
© 2016 Apple Inc.

Este software da Apple está sendo fornecido para você pela Apple Inc. ("Apple") tendo em consideração sua concordância com os seguintes termos, e o uso, instalação, modificação ou redistribuição deste software da Apple constitui aceitação destes termos. Se você não concordar com estes termos, não use, instale, modifique ou redistribua este software da Apple.

Com relação à sua anuência em cumprir os seguintes termos, e sujeito a esses termos, a Apple concede a você uma licença pessoal, não exclusiva, sob os direitos autorais da Apple neste software original da Apple (o "Software da Apple"), para utilizar, reproduzir, modificar e redistribuir o Software da Apple, com ou sem modificações, na fonte e/ou formatos binários; desde que, caso você redistribua o Software da Apple em sua totalidade e sem modificações, você mantenha este aviso e o seguinte texto e isenções em todas essas redistribuições do Software da Apple.

O nome, marcas comerciais, marcas de serviço ou logotipos da Apple Inc. não podem ser usados para endossar ou promover produtos derivados do Software da Apple sem permissão prévia específica e por escrito da Apple. Exceto quando expressamente declarado no presente aviso, nenhum outro direito ou licença, expresso ou implícito, é concedido pela Apple, incluindo, entre outros, quaisquer direitos de patente que possam ser violadas por seus projetos ou por outros projetos em que o Software da Apple pode ser incorporado.

O Software da Apple é fornecido pela Apple “COMO ESTÁ”. A APPLE NÃO DÁ NENHUMA GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, AS GARANTIAS DE NÃO INFRAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM, COM RELAÇÃO AO SOFTWARE DA APPLE OU AO SEU USO E OPERAÇÃO SOZINHO OU EM COMBINAÇÃO COM SEUS PRODUTOS.

EM NENHUM CASO A APPLE SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, INDIRETOS, ACIDENTAIS OU CONSEQUENTES (INCLUINDO, ENTRE OUTROS, A AQUISIÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS SUBSTITUTOS, PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS OU INTERRUPTÃO DE NEGÓCIOS) DECORRENTES DE QUALQUER FORMA DO USO, REPRODUÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU DISTRIBUIÇÃO DO SOFTWARE DA APPLE, INDEPENDENTEMENTE DE COMO FORAM CAUSADOS E DE ESTAREM SOB A TEORIA DOS CONTRATOS, ATO ILÍCITO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA), RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU DE OUTRA FORMA, MESMO QUE A APPLE TENHA SIDO AVISADA SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.

- **SQLCipher:** <https://www.zetetic.net/sqlcipher/>

© 2008-2012 Zetetic LLC

Todos os direitos reservados.

A redistribuição e o uso na fonte e formatos binários, com ou sem modificação, são permitidos desde que as seguintes condições sejam atendidas:

- As redistribuições do código fonte devem manter o aviso de direitos autorais acima, esta lista de condições e o seguinte aviso legal.
- As redistribuições em formato binário devem reproduzir o aviso de direitos autorais acima, esta lista de condições e o seguinte aviso legal na documentação e/ou outros materiais fornecidos com a distribuição.
- Nem o nome da ZETETIC LLC nem os nomes de seus colaboradores podem ser utilizados para apoiar ou promover produtos derivados deste software sem permissão específica, prévia e por escrito.

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA ZETETIC LLC “COMO ESTÁ” E TODA GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, AS GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO PASSA A NÃO TER VALIDADE. EM NENHUM CASO A ZETETIC LLC SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS, FLAGRANTES OU CONSEQUENTES (INCLUINDO, ENTRE OUTROS, A AQUISIÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS SUBSTITUTOS, PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS OU INTERRUPTÃO DE NEGÓCIOS) INDEPENDENTEMENTE DE COMO FORAM CAUSADOS OU DE QUALQUER TEORIA DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, RESPONSABILIDADE ESTRITA OU ATO ILÍCITO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA E OUTROS) DECORRENTES DE QUALQUER FORMA DE USO DESTE SOFTWARE, MESMO QUANDO AVISADO SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.

- **CocoaLumberjack** (v. 7.0): <https://github.com/CocoaLumberjack/CocoaLumberjack>

© 2010-2016, Deusty, LLC

A redistribuição e o uso deste software nas formas de fonte e binária, com ou sem modificação, são permitidos desde que as condições a seguir sejam atendidas:

- As redistribuições do código fonte devem manter o aviso de direitos autorais acima, esta lista de condições e o seguinte aviso legal.
- Nem o nome da Deusty nem os nomes de seus colaboradores podem ser utilizados para apoiar ou promover produtos derivados deste software sem permissão prévia específica e por escrito da Deusty, LLC.

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELOS DETENTORES DOS DIREITOS AUTORAIS E COLABORADORES “COMO ESTÁ” E TODA GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, AS GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO PASSAM A NÃO TER VALIDADE. EM NENHUM CASO O DETENTOR DO DIREITO AUTRAL OU COLABORADOR SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS, FLAGRANTES OU CONSEQUENTES (INCLUINDO, ENTRE OUTROS, A AQUISIÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS SUBSTITUTOS, PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS OU INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS) INDEPENDENTEMENTE DE COMO FORAM CAUSADOS OU DE QUALQUER TEORIA DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, RESPONSABILIDADE ESTRITA OU ATO ILÍCITO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA E OUTROS) DECORRENTES DE QUALQUER FORMA DE USO DESTE SOFTWARE, MESMO QUANDO AVISADO SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.

© 2020 ResMed. Todos os direitos reservados.

Sobre a ajuda eletrônica para o paciente do Aplicativo AirMini

Este aplicativo fácil de usar sincroniza-se com sua máquina para que você possa iniciar e parar a terapia e alterar os recursos de conforto. Ele também mostra como você dormiu na noite anterior e o ajuda a controlar toda a sua jornada de tratamento da apneia do sono.

Observação: Leia todo o Manual do usuário do AirMini™ e esta ajuda eletrônica antes de usar sua máquina com o Aplicativo AirMini.

PRECAUÇÃO

Nos EUA, a lei federal limita a venda deste dispositivo a médicos ou por ordem destes.

Indicações de utilização

O Aplicativo AirMini é um aplicativo móvel para os pacientes acionarem remotamente uma máquina compatível da ResMed prescrita, além de transferir, analisar e exibir informações de uso e terapêuticas. O Aplicativo AirMini também possibilita aos profissionais de saúde configurar remotamente os dispositivos de terapia compatíveis para apneia obstrutiva do sono (AOS).

Contraindicações

A terapia por pressão positiva nas vias respiratórias pode ser contraindicada em alguns pacientes com as seguintes doenças preexistentes:

- doença pulmonar bolhosa grave
- pneumotórax
- pressão arterial patologicamente baixa
- desidratação
- vazamento de líquido cefalorraquidiano, trauma ou cirurgia craniana recente.

Efeitos adversos

Caso sintam dor torácica atípica, dor de cabeça forte ou maior dificuldade de respiração, os pacientes devem informar o médico que prescreveu a terapia. Uma infecção aguda no trato respiratório superior pode exigir a interrupção temporária do tratamento.

Os seguintes efeitos colaterais podem ocorrer durante o tratamento com o dispositivo:

- ressecamento do nariz, boca ou garganta
- hemorragia nasal
- inchaço
- mal-estar no ouvido ou seio nasal;
- irritação nos olhos;
- erupções cutâneas.

Máquinas compatíveis

O Aplicativo AirMini é compatível com a máquina AirMini.

Segurança

Os recursos adicionais de segurança do AirMini e do Aplicativo AirMini, os passos que você adotar para proteger seu smartphone contra malwares e atualização constante do software e do firmware ajudam, conjuntamente, a proteger a sua privacidade e do seu dispositivo e a garantir o desempenho ideal.

Recursos de segurança

Os recursos de segurança do AirMini e do Aplicativo AirMini ajudam a proteger sua privacidade e a evitar o acesso não autorizado dos seus dados. Eles incluem:

- Uso de um código de resposta rápida (QR) para determinar a confiabilidade entre o AirMini e o Aplicativo AirMini
- Chaves exclusivas para cada smartphone e emparelhamento com o AirMini
- Criptografia para o aplicativo para transmissão dos dados em complemento à segurança do Bluetooth®
- Criptografia dos dados armazenados dentro do Aplicativo AirMini
- Autenticação por parte do servidor para atualizações de firmware do AirMini

A proteção do smartphone contra malware ajuda a manter a segurança de suas informações pessoais e dos dados do sono. A ResMed recomenda o seguinte:

- Ative o número de identificação pessoal (PIN) ou segurança por impressão digital no seu smartphone. Consulte as instruções de usuário do seu smartphone para informações sobre como ativar esses recursos.
- Evite a modificação do sistema operacional do smartphone fora dos padrões de segurança.
- Considere ativar a limpeza de dados remota no seu smartphone. A limpeza dos dados remotos é uma função disponível do seu smartphone para apagar os dados pessoais remotamente em caso de perda ou roubo do dispositivo. Consulte as instruções de usuário do seu smartphone para informações referentes à ativação desse recurso.
- Mantenha seu sistema operacional atualizado com as correções de segurança.

Atualizações de software e firmware

Para garantir o desempenho ideal, a ResMed recomenda que você sempre instale a última versão do software e firmware.

Quando uma atualização de firmware estiver disponível para o seu AirMini, uma mensagem aparecerá no smartphone quando você acessar Aplicativo AirMini para visualizar os dados do sono ou alterar as configurações de conforto.

Para instalar a atualização de firmware:

1. Clique em **Atualizar** para iniciar o processo de instalação. Para instalar a atualização, você deverá estar conectado à internet. Caso contrário, será pedido que você se conecte à internet e inicie novamente o processo.
2. Você pode optar por atualizá-lo posteriormente tocando em **Depois** ou atualizar imediatamente tocando em **Atualizar**.
Caso você opte por instalar a atualização posteriormente, você não conseguirá visualizar seus dados do sono ou alterar as configurações de conforto até que a atualização seja realizada.
3. Quando a atualização começar, mantenha o Aplicativo AirMini aberto e seu smartphone próximo.
Quando a atualização do firmware estiver concluída, uma mensagem indicará que seu firmware está atualizado.
4. Toque em **Continuar**.

Se uma atualização do software Aplicativo AirMini for necessária, uma mensagem indicará que você precisa atualizar o software.

Observação: Você deverá instalar as atualizações necessárias do software para continuar utilizando o Aplicativo AirMini.

Para instalar a atualização do software:

1. Toque em **Atualizar aplicativo**.

Você será redirecionado para a App StoreSM para fazer o download da Aplicativo AirMinida atualização do software.

2. Siga as eventuais solicitações adicionais na tela para concluir o processo de atualização.



Aplicativo AirMini Requisitos de sistema

Consulte a lista de dispositivos compatíveis com o Aplicativo AirMini no aplicativo ResMed.com/AirMiniApp.

Além disso, é necessário o sistema operacional iOS versão 9.3.5 (mínimo).

Para conectar sua máquina ao smartphone

1. Certifique-se de que sua máquina AirMini está corretamente configurada e conectada a uma fonte de alimentação.

Consulte o AirMiniManual do usuário para informações adicionais sobre a configuração.

2. No seu dispositivo inteligente, ative o Bluetooth.

Consulte o Manual do usuário de seu smartphone para obter instruções sobre como ativar o Bluetooth.

3. Abra o Aplicativo AirMini.

A primeira vez que o AirMini é aberto, você será solicitado a:

- fornecer consentimento para o uso de análises
- aceitar os termos de uso e o aviso de privacidade da ResMed
- fornecer consentimento para o aplicativo AirMini carregar dados para a nuvem

Marque as caixas de seleção necessárias para fornecer consentimento e aceitar políticas.

Observações:

- A caixa de seleção de análises vem marcada por padrão.
- De tempos em tempos, os termos de uso podem ser atualizados e você pode ser solicitado a fornecer consentimento novamente.
- Se você concordar em permitir que o aplicativo AirMini carregue seus dados para a nuvem, eles serão enviados do aplicativo AirMini para um servidor seguro.
- Existem dois recursos de carregamento de dados distintos:


Carregamento de dados em segundo plano - permite que o aplicativo carregue todos os dados que ainda não foram enviados para a nuvem sem nenhuma interação do usuário (ou seja, o aplicativo carrega os dados automaticamente sempre que novos dados estiverem disponíveis e uma conexão ativa com a internet estiver presente). Você deve fornecer consentimento para ativar esse recurso, pois ele está desativado por padrão. Esse recurso pode ser ativado ou desativado a qualquer momento na tela Mais.


Carregamento de dados sob demanda - recurso iniciado pelo médico ou paciente que carrega todos os dados que ainda não foram enviados para a nuvem. Esse recurso pode ser usado independentemente de o consentimento para o carregamento ter sido fornecido. Para usar esse recurso, o aplicativo deve ter conexão Bluetooth ativa com o AirMini.

Para obter informações adicionais, links também são fornecidos na página Boas-vindas:

- **Saiba mais** – explicação do modo como as análises são usadas
- **Termos** – Termos de uso da ResMed
- **Privacidade** – Aviso de privacidade da ResMed
- **meus dados** – informações sobre a privacidade dos dados.

Observações:

- Se você concordar que o Aplicativo AirMini carregue seus dados de tratamento para a nuvem, eles serão carregados a partir de Aplicativo AirMini servidor seguro.
 - Depois de ter concordado com o carregamento de seus dados, essas transferências de dados podem ser ligadas ou desligadas na seção **Preferências** do menu **Mais**.
 - Uma vez que você ligar as transferências de dados na seção **Preferências** do menu **Mais**, todos os dados de tratamento disponíveis no dispositivo serão carregados para a nuvem, e não apenas os dados gerados a partir dessa data.
 - Os dados continuarão a ser carregados para a nuvem até que você desligue as transferências na seção **Preferências** do menu **Mais**.
 - Se você desligar as transferências de dados na seção **Preferências** do menu **Mais**, os dados gerados desse ponto em diante não serão carregados para a nuvem. No entanto, os dados transferidos para a nuvem anteriormente permanecerão nela.
4. Quando suas escolhas estiverem concluídas na página de Boas-vindas, toque em **Continuar**.
5. Na sua máquina, pressione o botão Bluetooth  quando solicitado pelo Aplicativo AirMini.

Quando a luz começar a piscar em azul , o Bluetooth estará ativado na sua máquina AirMini e pronto para se conectar.

6. No seu smartphone, toque em **Conectar**.

Quando sua máquina AirMini for localizada, o nome dela aparecerá na lista de seleção de acessórios.


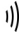
7. Selecione o nome da máquina na lista para fazer a conexão.
8. Na primeira vez que você emparelhar sua máquina AirMini com seu smartphone, será preciso realizar o procedimento de autenticação.

Quando solicitado pelo Aplicativo AirMini, comece o processo de autenticação inserindo o código de quatro dígitos localizado na parte de trás da sua máquina.

Alternativamente, você pode tocar em **Ler o código**. Se você ainda não deu a permissão, aparecerá uma mensagem pelo Aplicativo AirMini para que você permita o uso da câmera do seu dispositivo inteligente e posicione o código QR da máquina no campo de alcance da câmera.

Observação: O código QR pode ser encontrado na parte de trás da sua máquina AirMini.

9. Toque em **Concluído**.

Quando conectado com sucesso, o ícone de conexão Bluetooth   é exibido no canto superior direito do Aplicativo AirMini.

Observações:

- Enquanto a sua máquina está conectada a uma fonte de alimentação, ela está ligada e em modo de espera.
- Se seu AirMini estiver conectado a uma fonte de alimentação, se você deixar o Bluetooth ativado em seu smartphone, isso garantirá que sempre que esse dispositivo estiver nas proximidades da sua máquina, a conexão ocorrerá automaticamente.
- Os dados enviados por Bluetooth são criptografados para proteger sua privacidade.
- Você precisará emparelhar seu smartphone com uma máquina apenas uma vez.

Para utilizar a configuração guiada do equipamento

Na primeira vez que você tentar utilizar o AirMini, a tela de configuração do equipamento aparecerá. Você poderá utilizar este recurso de configuração interativa para concluir o processo de configuração do seu equipamento.

Observação: Nem todas as máscaras estão disponíveis em todas as regiões.

Para utilizar o recurso de ajuste do equipamento guiado:

1. Toque em **Começar** para iniciar o processo.
A tela para seleção do modelo e tipo de máscara aparecerá.
2. Selecione seu tipo de máscara.
3. Selecione seu modelo de máscara.
4. Toque em **Continuar**.
5. Conecte o tubo de ar ao AirMini.
6. Toque em **Avançar**.
7. Se você estiver utilizando uma máscara da série N20 ou AirFit™ P10 para AirMini ou AirFit N30 para AirMini e desejar utilizar umidificação, insira HumidX™ ou HumidX Plus. Se você estiver utilizando uma máscara da série F20 e desejar utilizar umidificação, insira o HumidX F20.
8. Toque em **Avançar** após inserir o umidificador.
9. Ajuste sua máscara.
10. Toque em **Avançar**.
11. Se você estiver utilizando uma máscara da série N20, F20 ou F30, conecte o encaixe dos tubos à máscara.
12. Toque em **Avançar**.

O processo de configuração guiada é concluído.

Você tem a opção de continuar no recurso de test drive tocando em **Vamos lá!** ou pode tocar em **Não obrigado** para visualizar o painel de controle do AirMini.


Test Drive

O test drive permite que você experimente a terapia em diferentes níveis de pressão do ar e verifique a vedação da máscara. Para usar o test drive será necessária uma conexão via Bluetooth com o dispositivo AirMini. Certifique-se de que sua máscara está colocada e respire normalmente.

1. Toque em **Start air (Iniciar ar)**. O dispositivo será iniciado com uma pressão de 4cm H₂O. Ajuste a máscara conforme necessário.
2. Toque em **Continue (Continuar)**. Você pode sair do test drive a qualquer momento tocando em **Stop air (Parar ar)**.
3. Toque em **Check mask seal (Verificar a vedação da máscara)**. Se a máscara precisa de ajuste, toque em **Need help? (Precisa de ajuda?)** Você será direcionado para a tela de resolução de problemas para ajudar a ajustar a máscara. Assim que o AirMini App detectar que o vazamento foi corrigido, você voltará para o test drive.
4. Toque em **Increase air pressure (Aumentar a pressão do ar)** para aumentar a pressão do ar para 7cm H₂O.
5. Toque em **Increase air pressure (Aumentar a pressão do ar)** para seguir para o ajuste final de 10cm H₂O.
6. Toque em **Finish (Concluir)** ou **Stop Air (Parar ar)** para concluir o test drive.

Observação:

- Toque em X na parte superior da tela a qualquer momento para sair do **Test Drive**.
- Assim que o test drive tiver começado, você terá 3 minutos para concluir a jornada. Se o test drive não for concluído em até 3 minutos, o AirMini app interromperá o fluxo de ar. Toque em **Restart air** (Reiniciar ar) a qualquer momento para continuar o test drive.
- Você também pode acessar o recurso **Test Drive** a qualquer momento no menu **More** (Mais).

Observação: Acesse a assistência adicional clicando no ícone de ajuda  em qualquer tela no qual ela aparecerá.


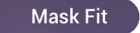
Ajuste da máscara e seções de terapia

As funções na tela Sono são organizadas em duas seções, **Ajuste da máscara** e **Terapia**.




Utilize a seção **Ajuste da máscara** para avaliar e identificar possíveis fugas de ar em torno da sua máscara.

Utilize a seção **Terapia** para acessar as funções de terapia e as configurações de conforto.


Para verificar o ajuste da máscara

1. Ajuste a máscara conforme descrito no manual do usuário da máscara.
2. Toque em **Sono** na guia Navegação.
A tela Sono é aberta.
3. Toque em **Ajuste da máscara**  .
A tela Ajuste da máscara é aberta.
4. Na tela Ajuste da máscara, toque em **INICIAR ajuste da máscara**.
A máquina começa a soprar ar.
5. Ajuste a máscara, a almofada da máscara e o capacete até obter o resultado **Boa vedação da máscara**.
6. Para interromper o teste de ajuste da máscara, toque em **PARAR ajuste da máscara**.
Se você não conseguir obter boa vedação de máscara, fale com o seu fornecedor.

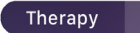Iniciar a terapia usando o aplicativo

1. Certifique-se de que sua máquina esteja ligada e configurada corretamente.
2. Confirme se sua conexão Bluetooth está ativada.
Consulte as instruções em Conectar sua máquina a um smartphone.
3. Ajuste sua máscara.
4. Toque em **Sono** na guia Navegação.
A tela Sono é aberta.
5. Toque em **Terapia**  .
A tela Terapia é aberta.
6. Se o SmartStart™ estiver ligado, ajuste sua máscara e respire normalmente para iniciar a terapia.
Do contrário, toque em **INICIAR**  para iniciar a terapia.

Parar a terapia usando o aplicativo



Se o Parada rápida estiver ligado, retire a máscara e a terapia será interrompida automaticamente. Ou então, toque em **PARAR** .

Alteração dos recursos de conforto

Sua máquina AirMini foi configurada para suas necessidades pelo seu fornecedor, mas você pode desejar fazer pequenos ajustes para tornar sua terapia mais confortável. Os recursos de conforto tempo de rampa, alívio da pressão, início rápido e parada rápida podem ser ajustados na tela Sono.

Observação: Alívio da pressão precisa ser habilitado pelo seu fornecedor.

Para acessar os recursos de conforto:



1. Toque em **Sono** na guia Navegação.
A tela Sono é aberta.
2. Toque em **Terapia**  .
3. Toque em **Opções** para abrir a tela de opções Sono.
Suas configurações de conforto atuais aparecerão na tela de opções Sono.

Tempo de rampa

Projetado para tornar o início da terapia mais confortável, o Tempo de rampa é o período em que a pressão aumenta gradualmente de uma pressão inicial mais baixa para a pressão prescrita para o tratamento.

Você pode definir o tempo de rampa como **Desligado**, **5 a 45 minutos** ou **Automático**. Quando o tempo de rampa for definido como **Automático**, o dispositivo detectará quando você adormece e subirá automaticamente para a pressão de tratamento prescrita.

Para ajustar o tempo de rampa:

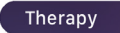



1. Toque em **Sono** na guia Navegação.
A tela Sono é aberta.
2. Toque em **Terapia**  .
3. Toque em **Opções** para abrir a tela de opções Sono.
Suas configurações de conforto atuais aparecerão na tela de opções Sono.
4. Toque na configuração de rampa atual.
5. Selecione sua configuração preferida.
6. Toque em **OK**.
Sua configuração preferida será exibida.

Observação: Depois de iniciar sua sessão de terapia, a configuração não poderá ser ajustada. Para ajustar a configuração, você deverá parar a terapia, ajustar a configuração e então iniciá-la novamente.

Alívio da pressão

Quando alívio da pressão estiver habilitado e ligado, você pode achar mais fácil expirar. Isso pode ajudá-lo a se acostumar com a terapia.


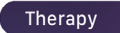


Para alternar entre alívio da pressão ativado ou desativado:

1. Toque em **Sono** na guia Navegação.
A tela Sono é aberta.
2. Toque em **Terapia**  .
3. Toque em **Opções** para abrir a tela de opções Sono.
Suas configurações de conforto atuais aparecerão na tela de opções Sono.
4. Se alívio da pressão tiver sido habilitado pelo seu fornecedor, ative-o  ou desative-o  de acordo com sua necessidade.

Início rápido

Quando o Início rápido está habilitado, a terapia inicia automaticamente quando você respira na máscara.

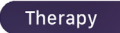
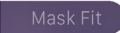


Para ativar ou desativar o início rápido:

1. Toque em **Sono** na guia Navegação.
A tela Sono é aberta.
2. Toque em **Terapia**  .
3. Toque em **Opções** para abrir a tela de opções Sono.
Suas configurações de conforto atuais aparecerão na tela de opções Sono.
4. Alterne entre início rápido ativado  ou desativado  para atender as suas necessidades.

Parada rápida

Quando o parada rápida estiver ativado, a terapia para automaticamente alguns segundos após você remover a máscara.

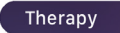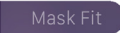Para ativar ou desativar parada rápida:

1. Toque em **Sono** na guia Navegação.
A tela Sono é aberta.
2. Toque em **Terapia**  .
3. Toque em **Opções** para abrir a tela de opções Sono.
Suas configurações de conforto atuais aparecerão na tela de opções Sono.
4. Alterne o parada rápida entre ativado  ou desativado  de acordo com a sua necessidade.

Menu Mais

É no menu **More** (Mais) que você pode acessar:

- Manual do Usuário do AirMini App
- Manual do Usuário do Dispositivo AirMini
- Site de suporte do AirMini
- Configuração do equipamento
- Recurso do test drive.

Você também pode carregar seus dados de sono para a nuvem. Toque em **Upload data now** (Carregar dados agora) e os dados serão enviados para a nuvem.

Observação:

- O dispositivo AirMini precisa estar conectado via Bluetooth e o dispositivo inteligente precisa ter uma conexão ativa com a internet.
- Apenas os dados que ainda não foram enviados para a nuvem serão carregados.
- Para recarregar todos os dados do AirMini, será necessário desinstalar/reinstalar o AirMini App, estabelecer uma conexão via Bluetooth com o AirMini e tocar em **Upload data now** (Carregar dados agora).

Painel

O Painel de indicações fornece a você uma visão geral dos dados da terapia.

Observação: Você deve sincronizar o AirMini ao Aplicativo AirMini para visualizar seus dados mais recentes da terapia.



Pontuação do sono (total de 100 pontos)

Fornece uma pontuação total do sono da noite anterior, analisando as quatro categorias fundamentais: Horas de uso, Vedação da máscara, Eventos por hora e eventos de Máscara ligada/desligada. Quanto maior a pontuação geral, melhor.

Para acessar as informações da pontuação myAir dos dias anteriores:

1. Selecione a data acima da pontuação myAir no Painel.
O resumo da pontuação myAir exibe as pontuações dos 30 dias anteriores.
2. Toque em qualquer data para exibir os detalhes da pontuação daquela data.



Horas de uso (70 pontos)

Exibe o número de horas de terapia que você recebeu na noite anterior. Quanto mais horas de terapia você receber, mais pontos você terá. Se usar a terapia por 1 hora, receberá 10 pontos; por 6 horas, receberá 60 pontos. Você pode receber até 70 pontos.



Vedação da máscara (20 pontos)

Ajuda a avaliar se sua máscara está bem vedada e identificar possíveis fugas de ar ao redor da máscara. Você pode receber até 20 pontos por uma fuga mínima, 10 a 15 pontos por uma fuga moderada e 0 a 10 pontos por uma fuga maior.

Se sua pontuação for baixa, tente reajustar a máscara.

Se você não conseguir obter boa vedação de máscara, fale com o seu fornecedor.



Eventos por hora (5 pontos)

Esta pontuação é derivada da média dos eventos (apneias e hipopneias) por hora durante o período de tratamento.



Eventos de Máscara ligada/desligada (5 pontos)

Exibe o número e vezes que você removeu a sua máscara durante a noite de sono anterior. Quanto menos vezes você retirar a sua máscara durante a noite, mais pontos você receberá.



Pressão

Exibe a pressão igual ou menor à pressão mais elevada liberada pelo AirMini durante a maior parte da sua terapia na noite anterior. Essa medição não produz efeito sobre o número de pontos que você atingiu, mas é uma indicação da pressão de ar necessária para tratar com eficácia a perturbação respiratória durante o sono.

Sobre AirMini

A tela Sobre AirMini fornece as seguintes informações sobre o seu AirMini:

- **Total de horas de uso** – o número total de horas que você utilizou o seu AirMini
- **Versão do firmware** – a versão em uso do firmware instalada em seu AirMini
- **Última sincronização** – o período de tempo desde que seu smartphone foi sincronizado com o seu AirMini pela última vez

Para acessar a tela Sobre AirMini, toque **Sobre a máquina AirMini** no menu Mais.

Viagens

Você pode levar sua máquina AirMini a qualquer lugar.

Certifique-se se você tem o adaptador de força adequado para a região da viagem. Para informações sobre a compra de um adaptador, entre em contato com o seu fornecedor.



Viagens de avião

Algumas companhias aéreas não classificam equipamentos médicos como bagagem de mão e, portanto, AirMini podem não considerá-los dentro dos limites de bagagem de mão. Verifique com a sua companhia aérea as políticas vigentes.

Você pode usar sua máquina AirMini em um avião, uma vez que ela atende às exigências da Agência Federal de Controle da Aviação dos EUA.




Cartas com declaração de cumprimento de exigências em viagens aéreas podem ser baixadas e impressas a partir do website www.resmed.com.






Ao utilizar o AirMini em um avião:

- Quando conectada à energia, desative o Bluetooth pressionando e segurando o botão Bluetooth  por pelo menos dez segundos, até a luz indicadora ficar branca.
- Não use o Aplicativo AirMini.
- Use o botão Iniciar/Parar  da sua máquina para iniciar a terapia.
- Para reconectar o Bluetooth (sair do modo avião), pressione o botão Bluetooth.

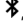Resolução de problemas

Se você apresentar algum problema, tente as sugestões a seguir. Verifique também o Manual do usuário da máquina AirMini. Caso você não consiga resolver o problema, entre em contato com o revendedor local da ResMed ou com o escritório da ResMed. Se você tiver algum problema com a máquina AirMini, não a abra.

Problema/Causa possível	Solução
Uma conexão Bluetooth não pode ser estabelecida.	
O Bluetooth pode estar desativado.	<p>Verifique seu smartphone para determinar se o Bluetooth está ativado .</p> <p>Verifique sua máquina AirMini para determinar se o Bluetooth está ativado. Quando a luz indicadora do Bluetooth  piscar em azul , a máquina estará pronta para ser emparelhada.</p> <p>Reconecte e emparelhe a máquina AirMini e o smartphone. Consulte Conectar sua máquina e smartphone para obter mais informações.</p> <p>Se essas soluções não resolverem o problema, tente reiniciar o smartphone.</p> <p>Se não conseguir estabelecer uma conexão Bluetooth entre sua máquina AirMini e o Aplicativo AirMini, você pode iniciar a terapia pressionando o botão Iniciar na sua máquina.</p>
Sua conexão Bluetooth pode estar fraca.	<p>Certifique-se de que a máquina AirMini seja colocada longe de possíveis fontes de interferência, como micro-ondas, roteadores wireless ou telefones sem fio.</p> <p>Se não conseguir estabelecer uma conexão Bluetooth entre sua máquina AirMini e o Aplicativo AirMini, você pode iniciar a terapia pressionando o botão Iniciar na sua máquina.</p>

Problema/Causa possível	Solução
Sua máquina pode estar no Modo Avião.	<p>Se uma luz branca  aparecer na sua máquina AirMini, ela pode estar em Modo Avião.</p> <p>Para desativar o Modo Avião, pressione o botão Bluetooth na sua máquina por pelo menos três segundos.</p> <p>Quando o Modo Avião estiver inativado e a luz indicadora do Bluetooth da sua máquina AirMini começar a piscar em azul , o Bluetooth estará ativado na sua máquina e ela estará pronta para o emparelhamento.</p> <p>Se não conseguir desativar o Modo Avião, você poderá iniciar a terapia pressionando o botão Iniciar na sua máquina AirMini.</p>
A luz indicadora do Bluetooth da minha máquina AirMini está constantemente branca. Não consigo emparelhar minha máquina.	
O Bluetooth está desativado.	<p>Pressione o botão Bluetooth na sua máquina AirMini por pelo menos três segundos. Quando a luz indicadora do Bluetooth piscar em azul , a máquina estará pronta para ser emparelhada.</p>
A máquina AirMini aparece na lista e dispositivos, mas eu não consigo estabelecer uma conexão.	Toque no nome do dispositivo na lista de dispositivos para confirmar que você deseja se conectar a essa máquina.
Meus dados de terapia não são transmitidos.	
O Bluetooth pode estar desativado.	<p>Certifique-se de que o Bluetooth está ativado em seu smartphone .</p> <p>Certifique-se de que o Bluetooth esteja ativado na máquina AirMini pressionando o botão Bluetooth dela. A luz indicadora do Bluetooth na máquina deve piscar em azul .</p> <p>Reconecte e emparelhe a máquina AirMini e o smartphone. Consulte Conectar sua máquina e smartphone para obter mais informações.</p> <p>Certifique-se de que o Bluetooth está ativado em seu smartphone .</p>
O smartphone pode estar no Modo Avião.	Desligue o Modo Avião do seu smartphone.

Problema/Causa possível	Solução
Há fuga de ar em torno da minha máscara ou a minha máscara faz barulho demais.	
A máscara pode estar mal ajustada.	Certifique-se de que sua máscara esteja ajustada corretamente. Consulte o Manual do usuário da máscara para obter instruções de ajuste ou execute a função Ajuste da máscara usando o Aplicativo AirMini para verificar o ajuste e a vedação da máscara.
O sistema AirMini pode estar montado incorretamente.	Certifique-se de que seu sistema AirMini esteja montado corretamente. Consulte o Manual do usuário AirMini para informações sobre a configuração da sua máquina AirMini.
A pressão de ar na minha máscara parece estar muito baixa ou parece que eu não estou recebendo ar suficiente.	
Rampa pode estar sendo executada.	Use Aplicativo AirMini para confirmar se o recurso de conforto Tempo de rampa foi ativado. Neste caso, aguarde o aumento da pressão do ar ou desligue tempo de rampa usando o Aplicativo AirMini.
HumidX ou o orifício de ventilação pode estar obstruído.	Inspecione o HumidX e o orifício de ventilação em busca de danos. Consulte o Manual do usuário AirMinipara informações sobre limpeza e manutenção.
HumidX pode estar úmido.	O HumidX precisa estar seco ao iniciar a terapia. Determine se o HumidX está molhado e substitua se necessário.
Não consigo iniciar a terapia.	
A fonte de alimentação pode não estar conectada.	<p>Conecte a fonte de alimentação e certifique-se de que o plugue esteja totalmente inserido. A luz indicadora verde na fonte de alimentação deve estar iluminada.</p> <p>Verifique se a luz indicadora verde sobre o botão Iniciar/Parar da máquina AirMini também está iluminada.</p>
A terapia parou.	
A tubulação de ar pode estar desconectada.	Certifique-se de que a tubulação de ar esteja adequadamente conectada. Use o botão Iniciar/Parar AirMini da máquina para iniciar a terapia.
Você pode sentir uma alta fuga da máscara enquanto o recurso Parada rápida estiver ativado.	<p>Certifique-se de que sua máscara esteja ajustada corretamente. Consulte o Manual do usuário da máscara para obter instruções de ajuste ou execute a função ajuste da máscara usando o Aplicativo AirMini para verificar o ajuste e a vedação da máscara.</p> <p>Como alternativa, desative o recurso Parada rápida.</p>
Não consigo ler o código QR para emparelhar minha máquina AirMini.	
A câmera não está focada ou está quebrada, ou a etiqueta do código QR está danificada.	Emparelhe sua máquina AirMini manualmente inserindo em seu smartphone o código de quatro dígitos encontrado na parte traseira da sua máquina.
A etiqueta do código QR não pode ser lida.	Contate seu fornecedor.

Problema/Causa possível	Solução
A luz sobre o botão Iniciar/Parar está piscando em verde.	
Ocorreu um erro na máquina AirMini.	Desconecte sua máquina AirMini. Espere alguns segundos e reconecte-a.
	Se o problema persistir, contate seu fornecedor. Não abra a máquina AirMini.
Estou tendo ressecamento ou meu nariz está seco ou congestionado.	
A máscara pode estar mal ajustada.	Ajuste e recoloque sua máscara para melhorar a vedação. Certifique-se de que nenhum ar esteja vazando. Consulte o Manual do usuário da máscara para obter instruções de ajuste ou execute a função ajuste da máscara usando o Aplicativo AirMini para verificar o ajuste e a vedação da máscara. Se sua máscara estiver bem ajustada, tente o HumidX Plus.
Pode ser necessária a umidificação.	Experimente a terapia utilizando o HumidX.
Estou usando o umidificador sem água e constatando a formação de gotículas de água incômodas em meu nariz, na máscara ou no tubo de ar.	
O nível de umidade está muito alto.	Se você estiver utilizando HumidX ou HumidX F20: Remova o umidificador e experimente a terapia sem umidificação.
	Se você estiver utilizando o HumidX Plus, tente, em vez disso, o HumidX. Isso ajudará a reduzir as gotículas de água.
	Se ainda estiver tendo problemas, contate seu fornecedor.

Observação: pode ser necessário que você use um umidificador sem água quando as condições de umidade do ambiente mudarem.

Valores exibidos

Valor	Faixa	Resolução de exibição
Sensor de pressão na saída de ar:		
Pressão na máscara	4–20 cm H ₂ O (4–20 hPa)	0,1 cm H ₂ O (0,1 hPa)

Informações adicionais

Para obter informações sobre limpeza, manutenção, resolução de problemas e outras especificações técnicas da sua máquina, consulte o Manual do usuário da sua máquina AirMini.



ResMed Pty Ltd

MANUFACTURER 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Austrália

Visite ResMed.com para conhecer outras localizações da ResMed a nível mundial. AirFit, AirMini, AutoSet, HumidX e SmartStart são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registradas da família de empresas ResMed. Para obter informações sobre patentes e outras propriedades intelectuais, visite ResMed.com/ip. “Feito para iPhone” significa que um acessório eletrônico foi projetado para se conectar especificamente ao iPhone e foi certificado pelo desenvolvedor para atender aos padrões de desempenho da Apple. A Apple não é responsável pelo funcionamento deste dispositivo ou sua conformidade com as normas de segurança e regulamentares. Observe que o uso deste acessório com o iPhone pode afetar o desempenho da conexão sem fio. Apple, o logotipo da Apple, iPhone e App Store são marcas comerciais da Apple Inc. iOS é uma marca comercial da Cisco, licenciada para a Apple Inc. A marca e os logotipos Bluetooth® são marcas comerciais registradas de propriedade da Bluetooth SIG, INC. Joy é uma marca comercial da Procter & Gamble. Joy é uma marca comercial da Procter & Gamble. Este produto utiliza um software desenvolvido pelo projeto ANTLR (<http://www.antlr2.org>) desenvolvido pelo projeto ANTLR (<http://www.antlr2.org>).

© 2020 ResMed. 2281196/3 2020-05

ResMed.com

CE 0123