

Masque Mirage Vista™



Le choix de qualité

Le masque Mirage Vista de ResMed associe confort et performances des masques ResMed dans un design discret et rationalisé.

Discret et ouvert


Grâce à la conception de ce masque, plus besoin de support frontal : le champ de vision s'élargit et le patient peut porter ses lunettes quand il le veut.

' Conçu avec l'utilisateur à l'esprit '

Les innovations du Mirage Vista font qu'il est facile à ajuster, à mettre en place et à retirer, à démonter, à remonter et à nettoyer.

Performance et confort

Le masque Mirage Vista continue d'adopter la technologie unanimement saluée de la bulle Mirage ResMed. Ceci, associé au sélecteur d'angle et aux stabilisateurs latéraux, assure la stabilité et l'étanchéité avec le confort à long terme.

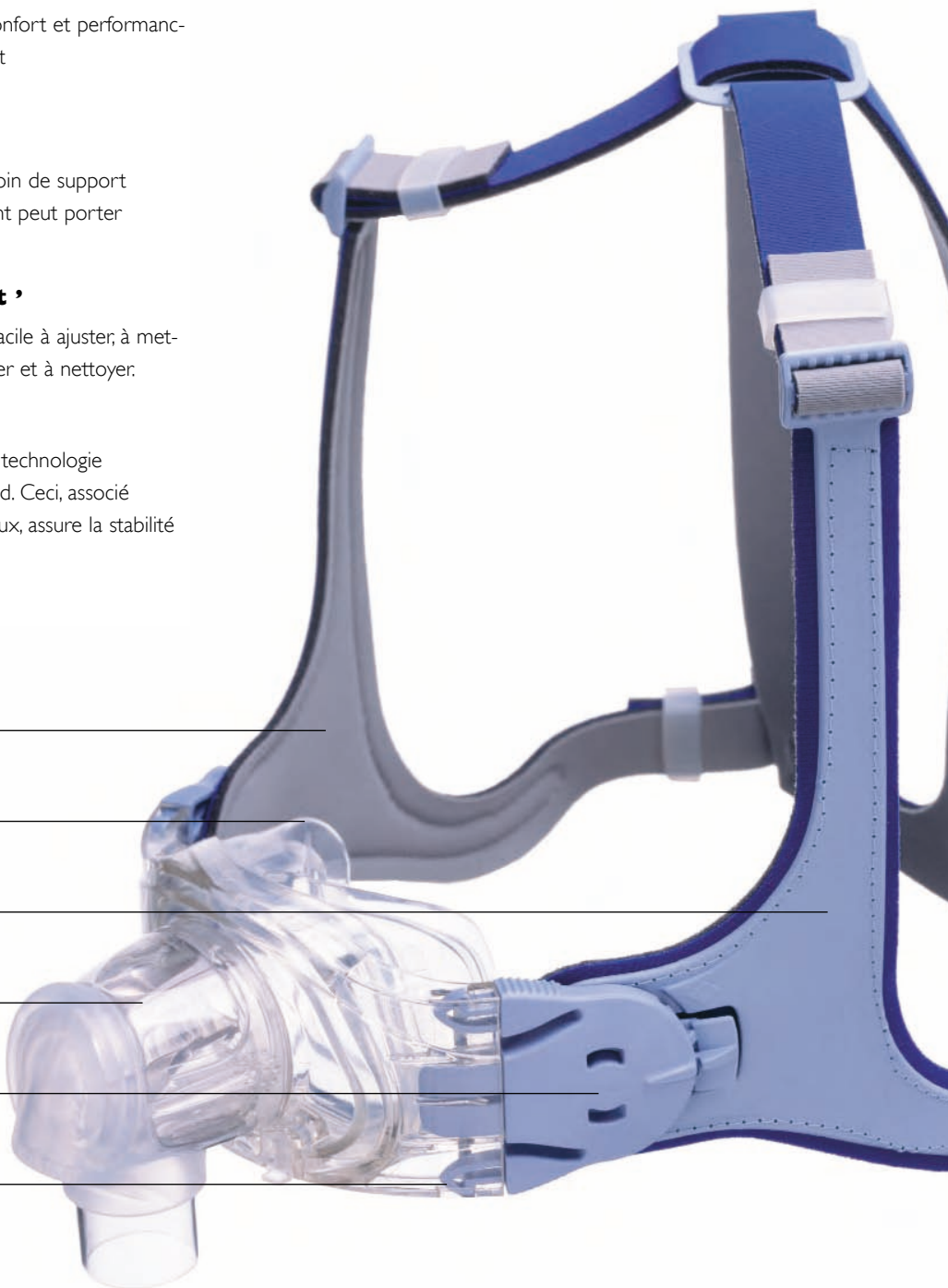

Hamais Set & Forget
aucun réajustement nécessaire

Absence de support frontal
ouverture du champ de vision

Stabilisateurs latéraux
maintien du harnais dans une position correcte

Coude cliquable
facilité d'emploi et d'utilisation

Sélecteur d'angle
réglage précis pour un ajustement optimal

Composants Easy Lock
manipulation plus facile

Coude cliquable

- S'emboîte simplement pour une facilité d'emploi et d'utilisation.
- Vous permet de mettre le masque sur le visage du patient, pendant que ce dernier respire normalement, avant de le raccorder au circuit respiratoire.
- Peut facilement être retiré alors que le masque est toujours en place.
- La rotation à 360 degrés et la pièce pivotante du tuyau procurent une plus grande liberté de mouvement pendant le sommeil.

Harnais Set & Forget

- Aucun réajustement nécessaire après la première mise en place.
- Les stabilisateurs latéraux maintiennent le harnais en place sur la tête, même sans le masque.
- Livré entièrement assemblé.
- Le Breath-O-Prene® permet à l'air de circuler tout en évacuant l'humidité.

Composants Easy Lock

- Plus d'éléments assemblés pour moins de pièces au total font que ce masque est plus facile à manipuler – même pour les patients avec des problèmes de dextérité.

Technologie de la bulle Mirage

- Performance reconnue de la bulle Mirage de ResMed.
- La double paroi souple de la bulle réduit la pression sur l'arête du nez.
- Optimisation de l'étanchéité même lorsque le patient bouge pendant son sommeil.

Masque Mirage Vista

Codes produit


| | | | |
|---------------------------|-------|-----------------------|-------|
| France | | Europe et | |
| Standard | 60027 | Asie Pacifique | |
| Profond | 60028 | Standard | 60003 |
| | | Profond | 60004 |
| Amérique du Nord | | | |
| et Amérique latine | | | |
| Standard | 60000 | | |
| Profond | 60001 | | |



Harnais Set & Forget – aucun réajustement nécessaire



Composants Easy Lock – manipulation plus aisée

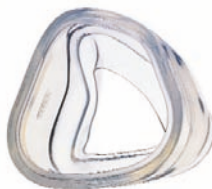

Technologie de la bulle Mirage – souple et à la fois totalement étanche



Le masque Mirage Vista permet aux patients de ne pas changer leurs habitudes de coucher.

Prévu pour la plus grande diversité de patients

Un masque recommandé pour la réussite du 1er traitement par PPC. Convient particulièrement aux patients difficiles à appareiller :

- Patients anxieux/claustrophobes
- Visages asymétriques
- Patients avec des problèmes de dextérité
- Patients où la question de la vision est importante (porteurs de lunettes...).

Gros plan technologique

Sélecteur d'angle

- Offre cinq positions pour un maximum de confort.
- Assure que le masque Mirage Vista s'adapte parfaitement au visage du patient.
- Les côtés gauche ou droit peuvent s'ajuster séparément pour une adaptation individualisée, même sur des visages asymétriques.
- Améliore la stabilité et l'étanchéité sans serrage excessif du harnais.

