

Meno spazio per la maschera.  
**Più spazio per la persona.**



Introducendo un disegno leggero e di basso profilo nell'ambito delle maschere oro-nasali, la Quattro FX propone un'alternativa alle maschere tradizionali di questa categoria e una scelta terapeutica in più.

I vantaggi per voi ...

**È facilissimo. Basta Misurare. Abbassare. Sigillare.**

La Quattro FX è studiata per assicurare un comfort ottimale fin da subito e mantenere la configurazione per gli usi successivi. Lo strumento di misura personalizzato e la tecnica di applicazione **Swing Seal** semplificano il compito di individuare la maschera della giusta misura, applicarla e assicurarne la tenuta, consentendovi di risparmiare tempo e denaro e di ridurre il numero delle visite.

**Risparmio di tempo e denaro**

La combinazione del cuscinetto Spring Air™ e del supporto elastico della Quattro FX creano un effetto-sospensione che elimina il bisogno di un supporto frontale. Eliminando un punto che prima necessitava di regolazione, la Quattro FX è ancora più facile e rapida da indossare.

**Gradimento della terapia**

Il comfort, le prestazioni e il basso profilo della Quattro FX favoriscono il gradimento della terapia e riducono gli abbandoni, fino alla fase di titolazione e oltre.

... e per i vostri pazienti

**Qualità e prestazioni che non vengono mai meno**

Le nuove tecnologie del cuscinetto Spring Air e del telaio elastico offrono la stabilità e l'aggiustamento angolare dei comuni supporti frontali. La Quattro FX assicura pertanto la qualità e le prestazioni di cui i pazienti hanno bisogno, ma in una maschera oro-nasale dal minore profilo.

**La libertà di essere**

I minori punti di contatto con il viso riducono il rischio di irritazioni cutanee, mentre il non impedimento della visuale aiuta ad infrangere le barriere fisiche ed emotive associate alla terapia con maschere oro-nasali.

**Una tranquilla notte di sonno**

Il sofisticato cuscinetto Spring Air distribuisce la pressione in modo uniforme e assorbe anche i movimenti più minimi, consentendo all'utente di dormire con tranquillità senza temere che la maschera perda la sua tenuta.



**Quattro™ FX**  
FULL FACE MASK



## L'innovazione

### Misurare. Abbassare. Sigillare. **NOVITÀ**

Individuare la giusta misura, applicare la maschera e assicurarne la tenuta sono operazioni rapide e semplici grazie alla Quattro FX.

Lo **strumento di misura** personalizzato facilita il compito di individuare la misura giusta per il paziente.

Una volta compiuta questa operazione, l'esclusiva tecnica **Swing Seal** facilita anche l'applicazione:

- 1 Posizionare il cuscinetto in modo da formare un angolo acuto con il ponte nasale...
- 2 ... abbassare quindi la metà inferiore della maschera sul viso (**swing**) per assicurarne la tenuta (**seal**).

Quattro FX: per una tenuta ottimale fin dalla prima volta.

#### La maschera inizia a metà del ponte nasale e non impedisce la visuale;

le ridotte dimensioni del telaio aumentano il comfort per chi dorme coricato sul fianco

#### I fori integrati per l'esalazione

disperdono l'aria in modo graduale e silenzioso

#### Il telaio elastico flessibile e durevole

è abbastanza robusto da stabilizzare la maschera sul viso e abbastanza morbido da assecondare i movimenti dell'utente durante il sonno

#### La rotazione del gomito a 360°


consente una maggiore facilità d'uso

#### Il giunto rotante

consente di attaccare e staccare il tubo dell'aria in modo agevole

#### Il nuovo design del copricapo

riduce la tensione ed è caratterizzato da una cinghia che poggia sulla sommità del capo anziché sulla zona più sensibile della nuca

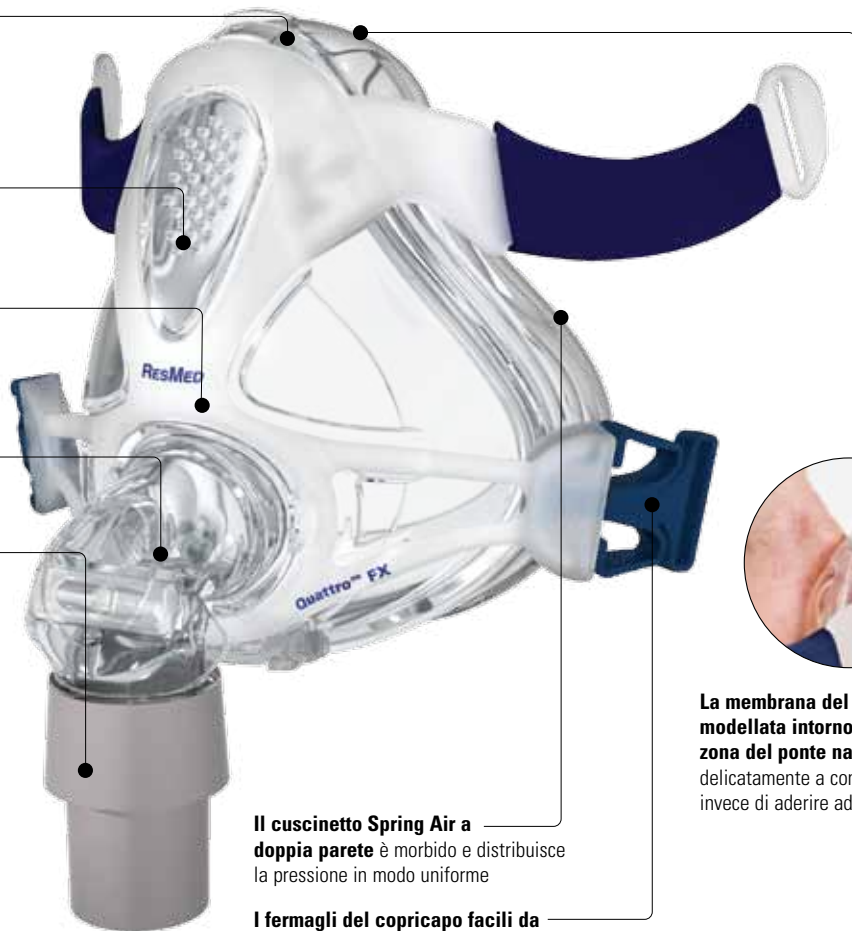

**Il cuscinetto Spring Air a doppia parete** è morbido e distribuisce la pressione in modo uniforme

**I fermagli del copricapo facili da attaccare e staccare** si regolano una volta sola, mantenendo sempre la configurazione ottimale

**La membrana del cuscinetto modellata intorno alla sensibile zona del ponte nasale** si gonfia delicatamente a contatto con il viso invece di aderire ad esso

## Codici prodotto

Small	61709
Medium	61710
Large	61711

**Quattro™ FX**  
FULL FACE MASK

[www.quattrofx.com](http://www.quattrofx.com)

Produttore: ResMed Ltd 1 Elizabeth MacArthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia. Distribuito da: ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA. ResMed (UK) Ltd 96 Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RY Regno Unito. Vedere [www.resmed.com](http://www.resmed.com) per le altre sedi ResMed internazionali. Quattro e Spring Air sono marchi registrati di proprietà di ResMed Ltd. Spring Air è registrato presso l'ufficio statunitense di marchi e brevetti. © 2010 ResMed Ltd. Le specifiche possono variare senza preavviso. 1014248/1 2010-09