

Masque facial Ultra Mirage™

NON VENTILE (SANS FUITE)

Un choix intelligent pour la ventilation non-invasive

Le masque Ultra Mirage non ventilé (sans fuite) de ResMed procure l'étanchéité, la stabilité et le confort idéal pour la ventilation non-invasive long terme à domicile et en milieu hospitalier.

Sa conception soignée et ses caractéristiques techniques offrent aux patients confort et facilité d'utilisation.

Le support frontal ajustable permet un ajustement du masque personnalisé pour chaque patient. La position la plus adaptée peut être sélectionnée lorsque le patient porte le masque. Ceci permet d'assurer l'étanchéité du masque tout en améliorant la stabilité d'ensemble.

Quatre clips (deux en haut et deux en bas) pour la fixation du harnais à l'entourage rigide

Ils permettent de retirer le masque sans réajuster le harnais : pratique et sûr

Support frontal ajustable

Quatre positions au choix pour s'adapter à chaque patient et pour un plus haut niveau d'étanchéité, de stabilité et de confort

Bulle Mirage à double jupe

La technologie brevetée de ResMed assure une étanchéité en compensant les mouvements du patient pendant son sommeil

Coude pivotant 360°

Procure flexibilité et contrôle sur le circuit respiratoire, et optimise la facilité d'emploi, le confort et la mobilité

Tampon frontal souple


Une seule pièce pour une distribution uniforme de la pression et une adaptation idéale au front du patient

Clips de retrait rapide du harnais

Retrait rapide en cas d'urgence et mise en place facile pour le personnel soignant, même lorsque le patient est alité

Coude bleu pour plus de sécurité

Conçu pour éviter toute confusion possible avec le coude transparent des masques ventilés de ResMed

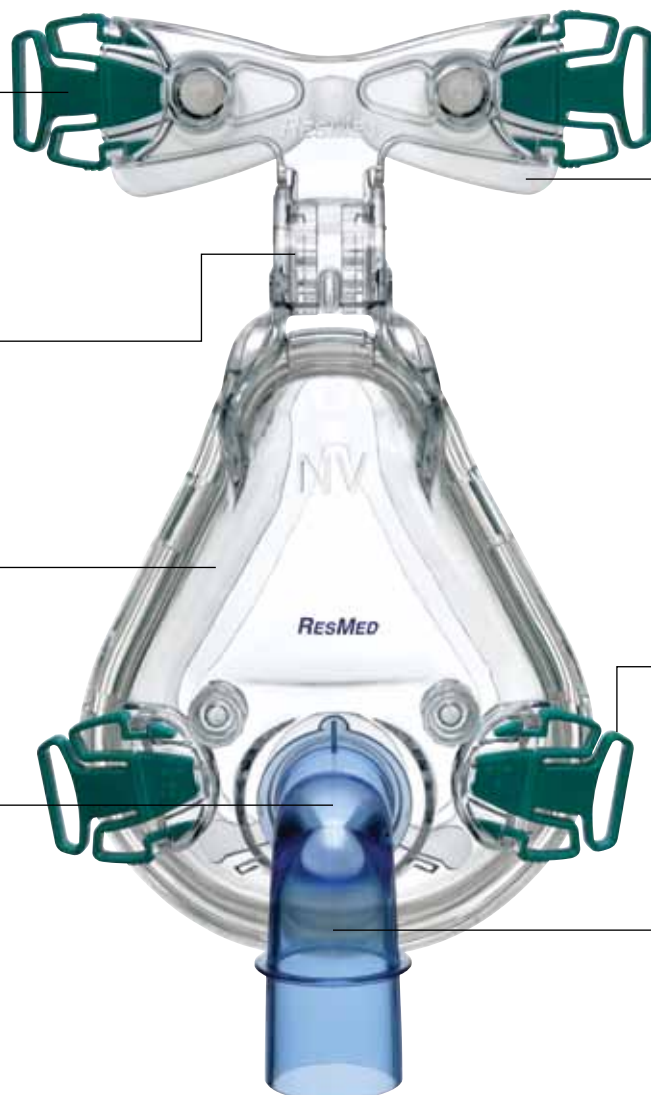

GROS PLAN TECHNOLOGIQUE

Support frontal ajustable : étanche même lorsque le patient bouge ou ouvre la bouche

- Grâce à ses quatre positions au choix, le support frontal améliore l'étanchéité et le confort.
- Les tampons frontaux souples s'adaptent au front du patient. Ils permettent une distribution uniforme de la pression sur une plus grande surface et réduisent ainsi la pression exercée sur le visage du patient.



AVANTAGES POUR LE PATIENT

Le confort

- La technologie de la bulle Mirage à double jupe permet de réduire la pression exercée sur le nez et ainsi d'assurer l'étanchéité et le confort.
- Le coude pivotant à 360° améliore plus encore la stabilité et la facilité d'emploi.

L'assurance de recevoir le traitement prescrit

- L'étanchéité et la stabilité sont synonymes de tranquillité d'esprit.

La facilité d'emploi

- Les clips de retrait rapide du harnais permettent une mise en place et un retrait rapides du masque.
- Le harnais est réglé une bonne fois pour toutes.

AVANTAGES POUR LES PROFESSIONNELS

L'assurance de l'efficacité du traitement

- Le masque couvrant à la fois le nez et la bouche, il est conçu pour traiter même si le patient respire par la bouche.

Un masque testé et reconnu avec une qualité et une technologie éprouvées

- La technologie brevetée de la bulle à double jupe de ResMed favorise l'observance en améliorant l'étanchéité et le confort*.

Les clips de retrait rapide du harnais

- Permettent d'ajuster facilement et rapidement le masque mais également de le détacher du harnais sans gêner le patient.

Un choix de tailles de masque

- Les gabarits 3D permettent un ajustement dès la première tentative.
- Le recours aux gabarits peut également réduire le temps consacré à l'ajustement.

Code produit

Masque facial Ultra Mirage non ventilé (sans fuite)

Petit Shallow	60642
Petit Standard	60643
Médium Shallow	60644
Médium Standard	60645
Large Shallow	60646
Large Standard	60647

* Sources internes ResMed

Distribué par : ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 Etats-Unis - **CE/REP** ResMed (UK) Ltd 96 Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RY R-U. Veuillez consulter le site www.resmed.com pour obtenir les coordonnées d'autres bureaux ResMed dans le monde.

Ultra Mirage™ facial NV - Indications : Masque facial prévu pour une utilisation avec des systèmes de ventilation non invasifs à valve expiratoire externe, dans le but de procurer une assistance ventilatoire aux patients souffrant d'insuffisance respiratoire. Utilisation chez les patients adultes requérant une suppléance ventilatoire non fonctionnelle. Usage multiple par un seul patient à domicile ou usage multiple par plusieurs patients en milieu hospitalier - **Dispositif médical de classe :** IIa - **Evaluation de la conformité par :** TÜV0123 - **Bon usage :** Lire attentivement le manuel utilisateur fourni avec le dispositif. - **Remboursement :** Pris en charge par les organismes d'assurance maladie dans certaines situations : consultez les modalités sur le site www.ameli.fr. Ultra Mirage et Mirage sont des marques commerciales de ResMed Ltd et Mirage est une marque déposée auprès de l'Office américain des brevets et des marques commerciales. © 2013 ResMed Ltd. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans notification préalable. 1011311/2 2013 05