

Ultra Mirage™

MASCHERA ORO-NASALE NON-VENTED

LA SCELTA DI STABILITÀ PER LA VENTILAZIONE NON INVASIVA

La maschera oro-nasale non-vented (NV) Ultra Mirage di ResMed offre una tenuta, una stabilità e un comfort superiori per la ventilazione non invasiva prolungata sia a domicilio, sia in ambiente ospedaliero.

L'Ultra Mirage NV fa suoi i pregi della fidata linea di maschere Mirage™ di ResMed e introduce nuove caratteristiche e perfezionamenti del design che migliorano terapia, facilità d'uso e comfort.

L'esclusivo supporto frontale regolabile consente di trovare la posizione migliore per il singolo paziente anche quando questi ha già la maschera indosso, e migliora stabilità e tenuta complessive.

Fermagli del copricapo a rilascio rapido

Questi fermagli di facile utilizzo consentono di togliersi la maschera senza perdere la configurazione ottimale del copricapo

Supporto frontale regolabile

Si può scegliere tra quattro posizioni quella più adatta al singolo paziente, migliorando tenuta, stabilità e comfort

Cuscinetto Mirage a doppia parete

La tecnologia brevettata di ResMed mantiene una tenuta efficace e asseconda i movimenti del paziente durante il sonno

Cordicella di rilascio d'emergenza

Meccanismo di sicurezza che aiuta i pazienti a togliersi la maschera con un unico semplice movimento nelle situazioni d'emergenza

Imbottiture frontali flessibili

Il design monoblocco distribuisce la pressione in maniera uniforme e si adatta al profilo della fronte del paziente

Telaio trasparente (non colorato)


Consente al prestatore di cure di scorgere il viso del paziente più facilmente e monitorare eventuali cambiamenti nel corso della terapia

Gomito con rotazione a 360°

Offre maggiore flessibilità e il controllo del circuito respiratorio, migliorando usabilità, comfort e mobilità

Gomito colorato in blu per una maggiore sicurezza

Progettato in modo da non poter essere scambiato con il gomito trasparente delle maschere ventilate di ResMed

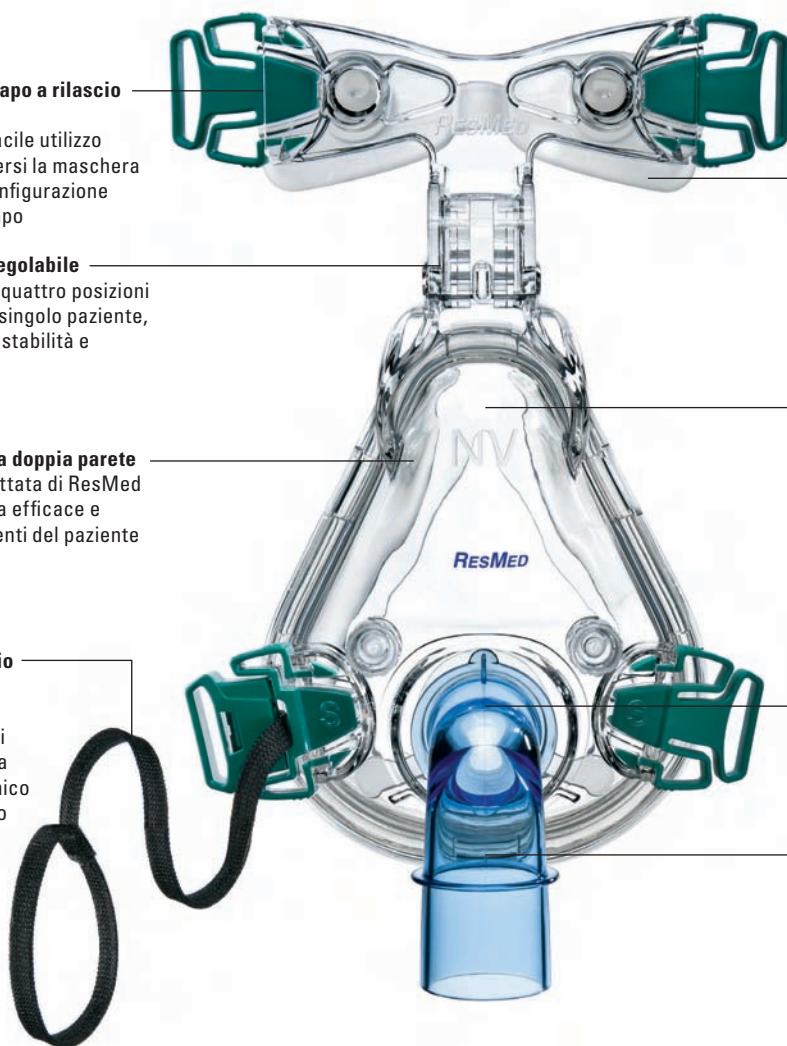

ASPETTI TECNOLOGICI SALIENTI

1. Supporto frontale regolabile – migliora tenuta e stabilità

- Scelta tra quattro diverse posizioni, facile da regolare anche indossato al paziente.
- Le flessibili imbottiture si modellano sulla fronte del paziente e distribuiscono la pressione in modo uniforme su una zona più estesa, riducendo la pressione sul viso.

2. La cordicella di rilascio d'emergenza – sicurezza nei casi d'emergenza.

- Consente al paziente di togliersi la maschera dal viso rapidamente; facile da usare ed efficace nelle emergenze.
- Tirare la cordicella separa il fermaglio in due parti, consentendo di togliere la maschera con un unico semplice movimento.



BENEFICI PER IL PAZIENTE

Una tecnologia di comprovata efficacia, un comfort su cui si può contare

- Il design del cuscinetto Mirage a doppia parete riduce la pressione sul naso, promuovendo tenuta e comfort.
- Il gomito, in grado di ruotare di 360°, offre maggiori stabilità e comodità.

Sicurezza che venga somministrata la terapia prescritta

- Le maggiori tenuta e stabilità si traducono in maggiore tranquillità per il paziente.

Comodità per l'utente

- Una volta predisposto, il copricapo non necessita di ulteriori regolazioni – la configurazione ottimale non viene perduta togliendosi la maschera.
- La cordicella di rilascio d'emergenza dà tranquillità e sicurezza.

BENEFICI PROFESSIONALI

Fiducia nell'efficacia della terapia

- Poiché la maschera copre sia il naso sia la bocca, essa offre una terapia efficace anche se il paziente respira dalla bocca.

Una qualità e un design comprovati, di cui ci si può fidare

- Il cuscinetto a doppia parete Mirage, brevettato da ResMed, promuove la compliance migliorando tenuta e comfort.

Comodità e sicurezza

- I fermagli a rilascio rapido del copricapo consentono di indossare e togliere la maschera in modo facile e rapido.
- La cordicella di rilascio d'emergenza consente di togliere rapidamente la maschera in caso d'emergenza.

Selezione efficiente della misura della maschera

- I modelli tridimensionali consentono di individuare la configurazione giusta al primo tentativo.
- L'uso dei modelli può anche ridurre il tempo necessario ad indossare/applicare la maschera.

CODICI PRODOTTO

Maschera oro-nasale non ventilata Ultra Mirage

Europa¹, Australia-NZ e Asia Pacifico

Small, shallow	60642
Small, standard	60643
Medium, shallow	60644
Medium, standard	60645
Large, shallow	60646
Large, standard	60647

Europa²

Small, shallow	60648
Small, standard	60649
Medium, shallow	60650
Medium, standard	60651
Large, shallow	60652
Large, standard	60653

Europa³

Small, shallow	60606
Small, standard	60607
Medium, shallow	60608
Medium, standard	60609
Large, shallow	60616
Large, standard	60617

Informazioni per gli utenti europei disponibili nelle seguenti lingue:

¹ Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, portoghese e olandese

² Inglese, svedese, norvegese, danese e finlandese

³ Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, portoghese, olandese, ungherese, russo, polacco, turco, ceco, slovacco e greco