

Eigens für Frauen entwickelt



Die Quattro™ FX for Her ist eine leichte, unaufdringliche Full Face Maske, die Patientinnen eine echte Alternative bietet

VORTEILE FÜR SIE ...

Größe bestimmen, nach unten schwenken, perfekter Sitz – so einfach ist das

Quattro FX for Her gibt Ihnen die Mittel, schnell, einfach und zuverlässig einen komfortablen und dichten Maskensitz zu erzielen – gleich von Beginn an. Die speziell entwickelte Schablone zur Ermittlung der Größe und die **Schwenk**-Technik vereinfachen die Größenauswahl, das Anlegen und die Abdichtung. Sie sparen Zeit, Geld und haben zufriedene Patientinnen.

Zeit- und Kosteneinsparungen

Durch die dämpferartige Kombination aus Spring Air™-Maskenkissen und Flexi-Rahmen konnte auf den Einsatz einer Stirnstütze verzichtet werden. Hierdurch lässt sich Quattro FX for Her noch schneller und sicherer anlegen.

Therapieakzeptanz

Komfort, Leistungsumfang und Freiheitsgefühl von Quattro FX for Her sorgen dafür, dass Benutzer die Therapie von Beginn an besser annehmen und fortsetzen.

... UND IHRE PATIENTINNEN

Qualität und Leistung auf höchstem Niveau

Die neue Kombination aus Spring Air™-Maskenkissen und Flexi-Rahmen bietet hohe Stabilität auch ohne konventionelle Stirnstütze. Quattro FX for Her verbindet damit Leistung und Komfort in einer weniger aufdringlichen Full Face Maske.

Freiheit, die Sie schätzen werden

Die Reduktion von Kontaktpunkten mit dem Gesicht lässt ein neues Tragegefühl entstehen. Freie Sicht reduziert körperliche und emotionale Barrieren, die mit konventionellen Full Face Masken auftreten können.

Für einen guten Schlaf

Mit reichlich Freiheit für die Haare lässt die Quattro FX for Her Raum für persönlichen Stil – das Haar kann zusammengebunden oder offen, über oder unter dem Kopfband getragen werden.



Quattro™ FX for Her
FULL FACE MASKE

Weniger Maske. Mehr Freiheit.



Technische Highlights

Größe bestimmen. Schwenken. Perfekter Sitz. **NEU**

Das Anpassen, Anlegen und Abdichten von Quattro FX geht schnell und einfach.

Die speziell angefertigte **Schablone zur Größenauswahl** sorgt für eine leichte und genaue Anpassung.

Nachdem die richtige Größe ermittelt wurde, kann die Maske durch die **Schwenk-Technik** ganz leicht angelegt werden:

- 1 Positionieren Sie das Maskenkissen zunächst von schräg oben auf den Nasenrücken...
- 2 ... **schwenken** Sie die untere Maskenhälfte dann nach unten auf das Gesicht, um sie **abdichten**.

Quattro FX for Her: passt richtig und sitzt sicher – von Beginn an.

Uneingeschränkte Sicht

und ein Gefühl der Freiheit, da die Quattro FX Maske in der Mitte des Nasenrückens aufliegt. Der kompakte Rahmen macht das Schlafen auf der Seite angenehmer.

Integrierte Ausatemöffnung

lässt die Luft sanft und leise aus der Maske austreten.

Flexibler, strapazierfähiger Flexi-Rahmen

stark genug, um die Maske auf dem Gesicht zu stabilisieren, und gleichzeitig weich genug, um Bewegungsfreiheit während des Schlafes zu gewährleisten.

Um 360° drehbares Kniegelenk


ermöglicht anwenderfreundliche Positionierung des Atemschlauches.

Neues Komfort-Kopfband

mit konturiertem Design, das sicheren Sitz gewährleistet und sensible Kopfbereiche ausspart.

Passt sich der individuellen Frisur an

Unabhängig davon, ob die Patientin lange oder kurze Haare hat und diese zusammengebunden oder offen trägt – das Kopfband von Quattro FX for Her ist bequem und praktisch. Zudem ist es in einer femininen Farbkombination ausgeführt – nur für Frauen.

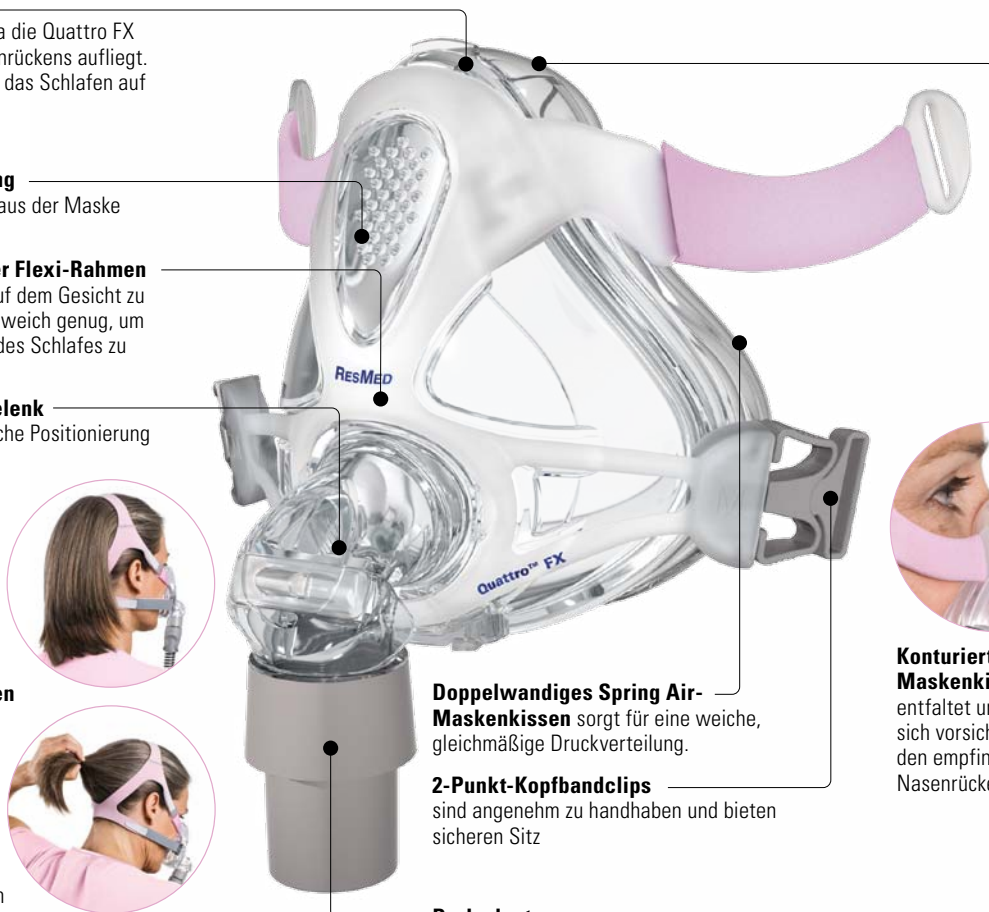

Doppelwandiges Spring Air-Maskenkissen sorgt für eine weiche, gleichmäßige Druckverteilung.

2-Punkt-Kopfbandclips sind angenehm zu handhaben und bieten sicheren Sitz

Drehadapter ermöglicht die einfache Handhabung beim Anschließen und Abnehmen des Atemschlauches

Konturierte Maskenkissenmembran entfaltet und bläst sich vorsichtig um den empfindlichen Nasenrückenbereich auf.

Artikelnummern

Small	62518
Medium	62519

Quattro™ FX for Her
FULL FACE MASKE

www.quattrofx.com

Vertrieb durch: ResMed Deutschland GmbH · Haferwende 40 · 28357 Bremen · DEUTSCHLAND · Tel 0421 48993-0 · Fax 0421 48993-10 · E-Mail info@resmed-deutschland.de

Vertrieb durch: ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA. **ECIREP** ResMed (UK) Ltd 96 Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RY UK. Informationen zu weltweiten Geschäftsstellen von ResMed finden Sie auf unserer Website unter www.resmed.com. Quattro und Spring Air sind Marken der ResMed Ltd und beim Patent- und Markenamt in den USA registriert. © 2012 ResMed Ltd. Die technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. 1015238/1 2012-02

Hersteller: ResMed Ltd
1 Elizabeth Macarthur Drive
Bella Vista NSW 2153 Australien