

Mirage™ SoftGel

NENÄMASKI

Tuntuu heti pehmeältä ja säilyy käytössä mukavana

Mirage SoftGel -nenämäsmaski on ennennäkemättömän pehmeä ja mukava. DoubleGel-pehmikkeen kirkas geelikerros tekee maskista mukavan ja sininen geelikerros tukevan ja istuvan.

ResMedin hyväksi tunnettua tehokkuutta ja laatua edustavassa rungossa voidaan käyttää kahta vaihdettavaa pehmikettä, Mirage SoftGel - ja Mirage Activa™ LT -pehmikettä.

POTILAAN KANNALTA

Miellyttävä ja hyvin istuva

- DoubleGel-pehmikkeessä yhdistyvät pehmeys ja hyvä istuvuus

Virkistävä yöuni

- Maskissa olevat pienet ilma-aukot hajottavat ilman hiljaisesti niin, ettei ilmavirtaus häiritse maskin käyttäjää ja hänen vieressään nukkuvaa.

Helpompi säätää sopivaksi

- Mirage-maski, jossa on kaksiosainen DoubleGel-pehmike, on helppo säätää.
- Pehmike mukautuu käyttäjän yksilöllisten kasvopiirteiden mukaan niin, että maski istuu mukavasti.

Vaihdettavat pehmikkeet tarjoavat valinnanmahdollisuuksia

- Pehmikevaihtoehtojen ansiosta hoitomyöntyvyys säilyy ilman, että joudutaan vaihtamaan koko maski.

POTILAIDEN SUOSIKKI

- Kahdeksan kymmenestä potilaasta arvioi Mirage SoftGel -maskin mukavammaksi ja kestävämmäksi kuin muut geelimasakit*.
- Kolme neljästä potilaasta arvioi nukkuvansa paremmin Mirage SoftGel -maskin ansiosta*.

* ResMedin käyttäjäarvioinnit — Mirage SoftGel -maski verrattuna kilpailijoiden geelimaskeihin

HENKILÖKUNNAN KANNALTA

Tyytyväiset asiakkaat, parempi hoitomyöntyvyys

- Hoitoa on helpompi noudattaa, kun maski saadaan kerralla sopivaksi ja se myös pysyy mukavana.
- Monipuoliset ohjeet käytön helpottamiseksi.

Tehostaa maskin käyttöä

- Vaihdettavat pehmikkeet ja yhtenäiset osat tehostavat maskin käyttöä, mikä alentaa kustannuksia ja lyhentää sovitukseen ja käytön opetteluun kuluva aikaa.
- Useamman potilaan useamman kerran käyttöön tarkoitettu Mirage SoftGel -maski sopii toistuvaan käyttöön uniklinikoilla.
- Erittäin kestävä Mirage SoftGel takaa jatkuvasti hyvän suorituskyvyn ja vähentää tuotepalautusten määrää.

- Pehmeä, käyttämään houkutteleva, antaa hyvän ensivaikutelman
- Erinomainen uusille käyttäjille
- Lisää hoidon mukavuutta
- Tunnettu laatu ja luotettavuus



MicroFit-säätimellä

voidaan valita 24 asentoa, joilla parannetaan maskin istuvuutta, tiiviyyttä ja mukavuutta

ResMedin ainutlaatuinen maskirunko

sopii sekä Mirage SoftGel - että Mirage Activa LT -pehmikkeeseen, mikä tehostaa maskin käyttöä, säästää kustannuksia ja tarjoaa valinnanmahdollisuuksia

360 astetta kääntyvä kulmakappale

auttaa ilmaletkun sijoittamisessa


Hiljainen, ilmavirtaa hajottava ilmanpoisto

ohjaa uloshengitysilman pois pehmeästi ja hiljaisesti vieressä nukkuvaa häiritsemättä



Kulmakappale

auttaa hiilidioksidin poistumista ja vähentää melua

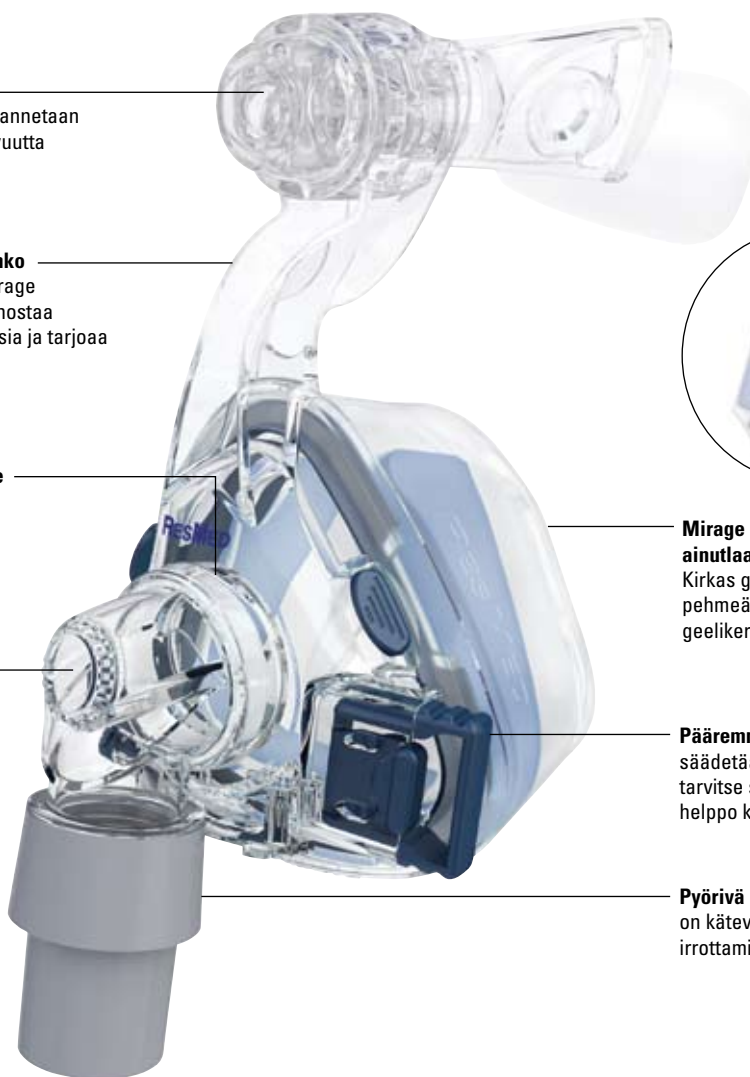

Mirage SoftGel -maskin ainutlaatuinen DoubleGel-pehmike

Kirkas geelikerros tekee maskista pehmeän ja mukavan ja sininen geelikerros tukevan ja istuvan

Pääremmien kiinnikkeet

säädetään sopiviksi, jolloin pääremmejä ei tarvitse säätää uudelleen, ja kiinnikkeet on helppo kiinnittää ja avata

Pyörivä liitin

on kätevä ilmaletkun liittämisen ja irrottamisen kannalta

TUOTENUMEROT

Mirage SoftGel -nenämaski

S Pieni	61636
M Keskikokoinen	61637
L Suuri	61638
LW Suuri, leveä	61639