

Ultra Mirage™ II -nenämaski


Monipuolinen maski kaikkiin tarkoituksiin

ResMedin Ultra Mirage™ II -nenämaski sopii useimmille potilaille, jotka saavat hengitysteiden ylipainehoitoa ResMedin CPAP-, kaksoispaine- tai AutoSet™-laitteella.

Koska pehmikettä on saatavana neljää eri mallia (normaali, suuri, matala ja matala/leveä), Ultra Mirage II sopii useimmille potilaille — ensimmäisellä kerralla, joka kerralla.


Ultra Mirage II luo nenämasteille edelleen standardia tiiviiden, mukavuuden ja hiljaisuuden suhteen, jotka ovat tärkeitä ominaisuuksia tehokkaan hoidon kannalta.

Maskissa yhdistyvät ResMedin hyväksi tunnettu kaksiseinämäisen Mirage-pehmikkeen teknologia ja ainutlaatuinen ja erittäin hiljainen ilmanpoisto.

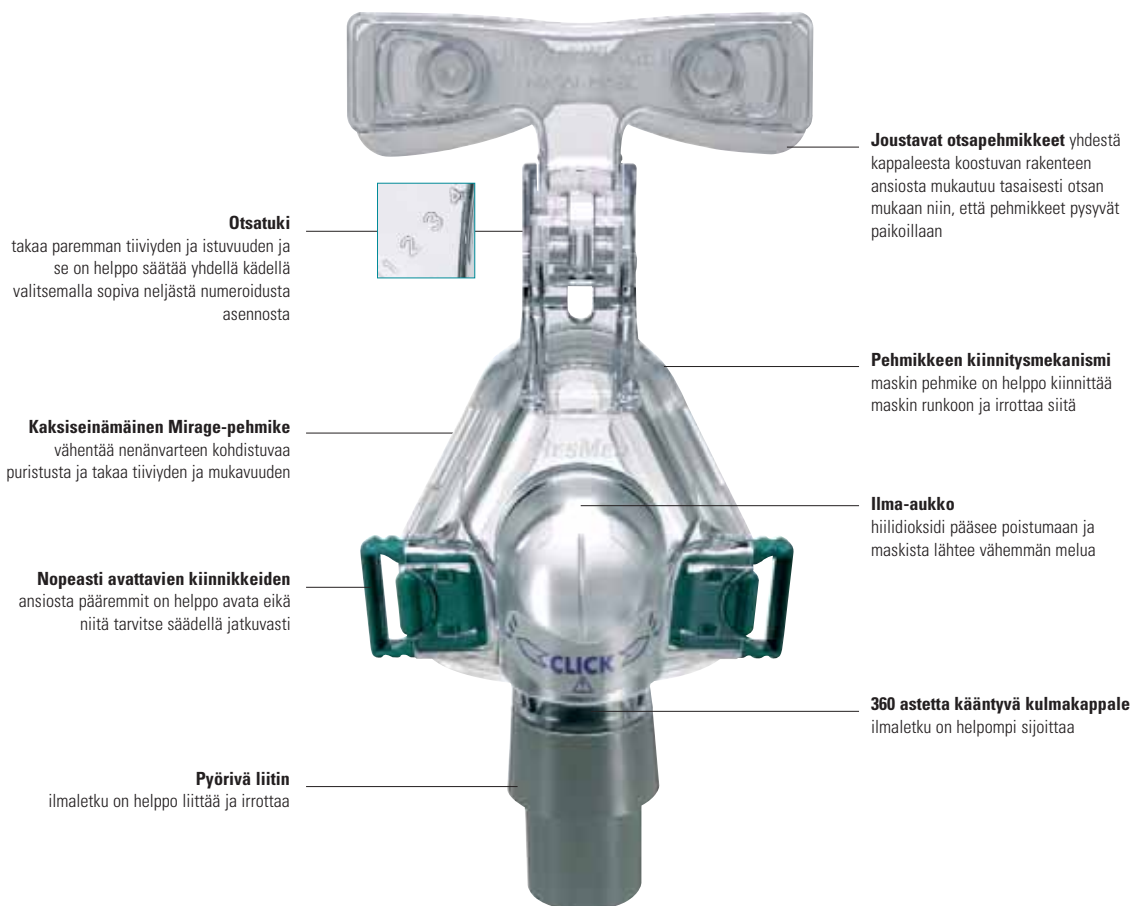

Tekninen edistysaskel – ainutlaatuinen ilma-aukko

- Ainutlaatuinen ilma-aukon rakenne hajottaa ilmavirtaa ja vähentää melua.
- Ilma-aukosta tuleva ilma suuntautuu alas letkun suuntaisesti, pois päin potilaasta ja vierustoverista.
- Ilma-aukko on suunniteltu erityisesti mahdollistamaan riittävän virtauksen uloshengitetyn hiilidioksidin poistamiseksi.

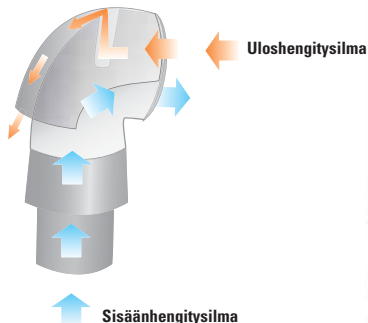

Säädettävä otsatuki

- Tarjoaa lisätukea erityisesti potilailla, jotka tarvitsevat suurempia hoitopaineita ja/tai kaksoispainelaitetta.
- Neljä numeroitua säätömahdollisuutta, jolloin maskin saa tiiviimmäksi ja istuvammaksi.

Pyörivä liitin

- Ilmaletku voidaan liittää ja irrottaa kätevästi ilman, että maski tarvitsee ottaa pois kasvoilta
- Sen ansiosta potilas pystyy liikkumaan vapaammin.

Pyörivä kulmakappale

- 360 astetta pyörivät kulmakappaleen ansiosta potilaat voivat valita sopivimman asennon ilmaletkua varten.



Säädettävä otsatuki — neljä selkeästi numeroitua asentoa

Istuvat ja mukavat pääremmit

- Pääremmien kiinnikkeiden ansiosta pääremmit voi kiinnittää/irrottaa nopeasti, eikä niitä tarvitse säädellä uudestaan.
- Neljä kiinnityskohtaa maskin runkoon, mikä parantaa maskin istuvuutta.

Sovittaminen käy nopeasti

- Maski ja pääremmit ovat valmiiksi paikallaan.
- Käyttöönottovaiheessa tarvitsee säätää vain otsatuki ja pääremmit.



Pyörivä kulmakappale — ilmaletku voidaan asettaa vapaammin

ULTRA MIRAGE II -NENÄMASKI

Tuotenumerot

Pohjois- ja Etelä-Amerikka

Normaali	16548
Suuri	16549
Matala	16550
Matala/leveä	16577

Iso-Britannia

Normaali	16321
Suuri	16322
Matala	16323
Matala/leveä	16324

Eurooppa (ei Iso-Britannia) ja Aasia

Normaali	16545
Suuri	16546
Matala	16547
Matala/leveä	16578

Australia ja Uusi-Seelanti

Normaali	16579
Suuri	16580
Matala	16581
Matala/leveä	16582