

Mirage Vista™ Maske



Die erste Wahl

Die Mirage Vista Maske von ResMed ist eine hervorragende Nasenmaske, die Komfort und Leistung der bewährten ResMed-Masken mit einem unauffälligen und funktionalen Design vereint.

Bequem und angenehm

Beim einzigartigen Design der Mirage Vista ist kein Stirnbauteil erforderlich, das Sichtfeld ist erheblich vergrößert und Patienten können bei Bedarf ihre Brille tragen.

Benutzerfreundlich

Eine Reihe innovativer Merkmale erleichtern das Anpassen, das Aufsetzen und Abnehmen, den Auseinanderbau und Zusammenbau sowie die Reinigung dieser Maske.

Leistung und Komfort

Bei der Mirage Vista wird die bewährte und vielfach genutzte ResMed Mirage Maskeneinsatztechnologie eingesetzt. Zusammen mit einem variablen Maskenneigungswinkel und Stabilisierungstreife am Kopfband sorgt dies für Stabilität und sicheren Sitz mit Langzeitkomfort.

Revolutionäres 2-Punkt-Kopfband

Keine wiederholtes Einstellen erforderlich.

Kein Stirnbauteil

Dadurch freies Sichtfeld.

Stabilisierungstreifen

Halten das Kopfband in der gewünschten Position.

Easy Lock Schlauchanschluss


Bequem und anwenderfreundlich.

Variabler Maskenneigungswinkel

Ermöglicht Feineinstellungen für optimalen Sitz.

Quick Connect Verbindungen

Für einfachste Handhabung.

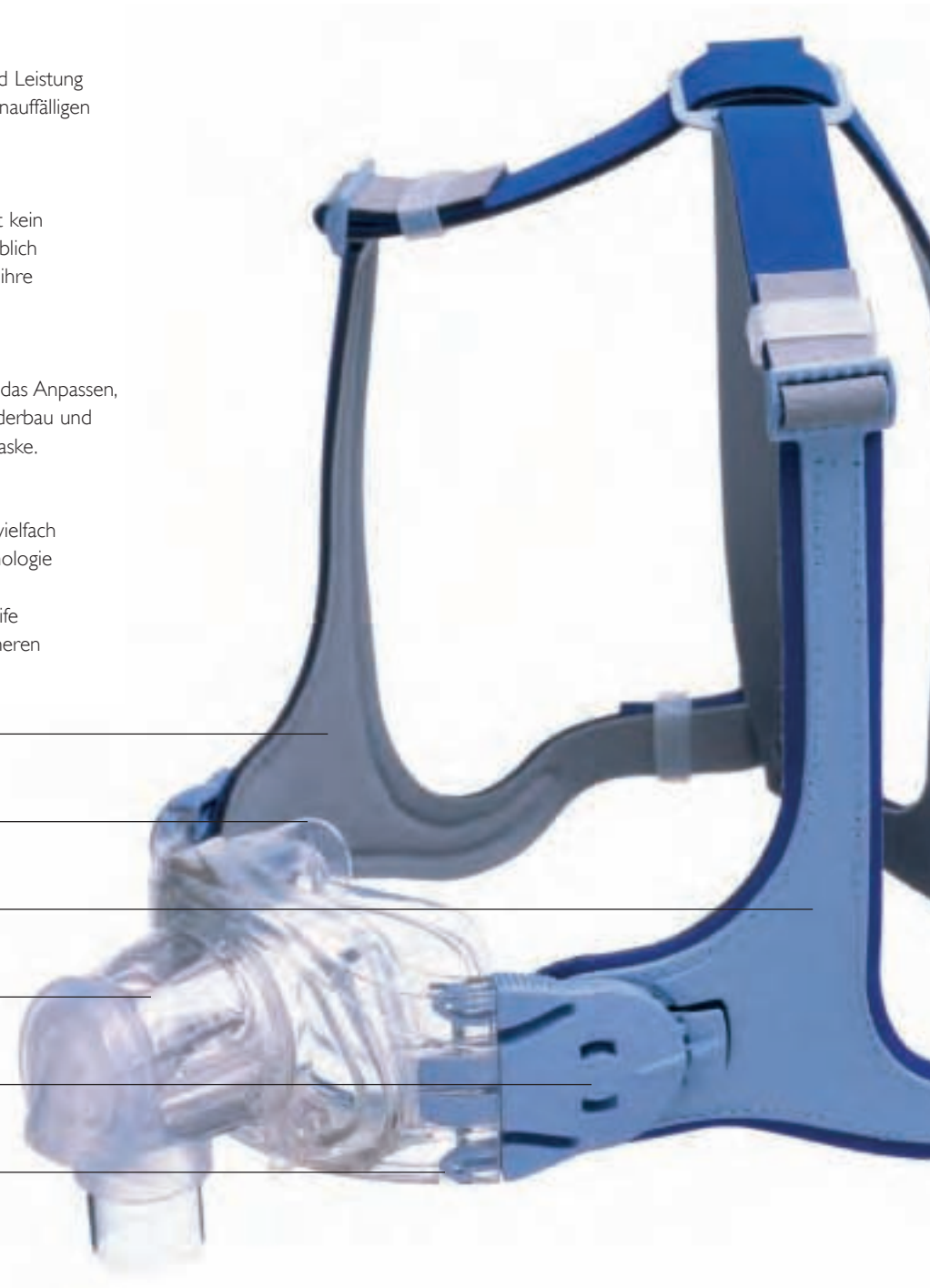

Easy Lock Schlauchanschluss

- Rastet ganz einfach ein und ist bequem und anwenderfreundlich.
- Bietet die Möglichkeit, die Maske anzupassen, während der Patient normal weiteratmet bevor der Luftschlauch angeschlossen wird.
- Kann auch bei angelegter Maske ganz einfach abgenommen werden.
- Hervorragende Bewegungsfreiheit im Schlaf durch 360° drehbares Kniegelenk und Schlauchadapter:



Easy Lock Schlauchanschluss - einfach und bequem.



Revolutionäres 2-Punkt-Kopfband

- Nach der ersten Einstellung keine weiteren Anpassungen erforderlich.
- Stabilisierungstreifen halten das Kopfband in Form, selbst wenn die Maske nicht getragen wird.
- Die Mirage Vista wird vollständig zusammengebaut geliefert.
- Das Breath-O-Prene®-Kopfbandmaterial verhält sich atmungsaktiv und verhindert so die Ansammlung von Feuchtigkeit auf der Haut.

Revolutionäres 2-Punkt-Kopfband - nur einmaliges Anpassen erforderlich.



Quick Connect Verbindungen - einfachste Handhabung.

Quick Connect Verbindungen

- Die Maske wird in drei bereits vorkonfektionierten Baugruppen geliefert und besteht insgesamt aus nur wenigen Teilen, wodurch die Handhabung selbst für Patienten mit körperlichen Einschränkungen erleichtert wird.



Mirage Maskeneinsatztechnologie - weich und bequem für optimalen Maskensitz.

Die Mirage Maskeneinsatztechnologie

- Bewährte Leistung der ResMed-Maskeneinsatztechnologie.
- Weicher, doppelwandiger Maskeneinsatz erzeugt nur sanften Druck auf den Nasenrücken.
- Optimiert den Maskensitz, selbst wenn der Patient seine Schlafposition verändert.



Mit der Mirage Vista können Patienten ihren normalen Schlafvorbereitungen nachgehen.

Für eine Vielzahl von Patienten geeignet

Die Mirage Vista ist die Maske der Wahl für neue CPAP-Patienten und für solche Patienten, die bereits schlechte Maskenerfahrungen gemacht haben, wie z. B.:

- ängstliche/klaustrophobische Patienten
- Patienten mit asymmetrischen Gesichtskonturen
- Patienten mit körperlichen Einschränkungen
- Brillenträger

Technische Highlights

Variabler Maskenneigungswinkel

- Bietet fünf optionale Maskenpositionen für optimale Bequemlichkeit.
- Stellt sicher, dass sich die Mirage Vista an das Gesicht des Patienten anpasst.
- Beide Kopfbandclips (links und rechts) können unabhängig voneinander eingestellt werden, so dass sie auch an asymmetrische Gesichtskonturen angepasst werden können.
- Bietet höchste Stabilität und Sicherheit ohne dass die Kopfbänder fest angezogen werden müssen.



Mirage Vista Maskensystem

Artikelnummer

Nord- und Südamerika	Standard	60000	Europa und asiatisch-pazifischer Raum	Standard	60003
	Deep	60001		Deep	60004

