

Mirage Micro™

MASQUE NASAL

ETANCHEITE PROUVEE, AJUSTEMENT PARFAIT

La toute dernière génération de masques nasaux ResMed permet à un plus grand nombre d'utilisateurs de bénéficier des caractéristiques essentielles que sont l'ajustement personnalisé, l'étanchéité et le confort.

Associée à la célèbre bulle Mirage™ à double jupe, la molette de

réglage unique MicroFit™ procure un ajustement précis adaptable aux besoins de chaque utilisateur. D'une utilisation intuitive pour les professionnels du sommeil comme pour les utilisateurs, le Mirage Micro marque une nouvelle étape dans l'évolution des masques nasaux.

La molette de réglage MicroFit
offre 24 positions pour un ajustement, une étanchéité et un confort optimisés

Le support frontal
n'obstrue pas le champ de vision grâce à son design épuré et esthétique

Les orifices de ventilation silencieux
minimisent le bruit et, grâce au clip amovible, sont faciles à nettoyer

Le coude pivotant à 360°
permet de positionner le circuit respiratoire afin de maximiser le confort


La pièce de séparation du coude
facilite le rinçage du CO₂ et réduit le bruit



La bulle Mirage à double jupe
réduit la pression au niveau de l'arête du nez et optimise l'étanchéité ; la patte d'attache permet de facilement retirer la bulle de l'entourage rigide

Les clips du harnais Set-and-forget
permettent de conserver les réglages du harnais et sont faciles à attacher et détacher

La pièce pivotante
facilite le raccordement et le retrait du circuit respiratoire

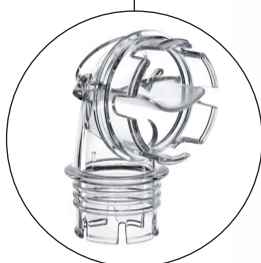



GROS PLAN TECHNOLOGIQUE

Molette de réglage MicroFit

Choix de 24 positions au bout des doigts : ajustement efficace et confortable pour un plus grand nombre d'utilisateurs

- **Ajustable** : peut s'ajuster facilement même lorsqu'il est sur le visage de l'utilisateur
- **Précis** : chaque tour de molette permet d'affiner l'ajustement du support frontal
- **Progressif** : s'avance vers le visage, permettant à l'utilisateur de déterminer quand l'ajustement lui convient le mieux
- **Fonctionne conjointement avec la bulle** : la bulle à double jupe s'adapte au visage au fur et à mesure de l'ajustement de l'angle du masque à l'aide de la molette, procurant ainsi une étanchéité améliorée sans serrage excessif du harnais

AVANTAGES POUR LE PATIENT

Utilisation facile et intuitive

- La molette de réglage MicroFit est facile à ajuster, même d'une seule main en étant couché
- Le cache des orifices de ventilation peut être retiré pour un nettoyage facile et hygiénique
- Conception de masque intuitive pour faciliter la manipulation, le nettoyage, le montage et le démontage

Ajustement et confort personnalisés

- La molette de réglage MicroFit permet d'affiner l'ajustement selon les caractéristiques du visage de chaque utilisateur
- La bulle à double jupe Mirage est disponible en cinq tailles, y compris une nouvelle taille Petite, afin de convenir à un plus grand nombre d'utilisateurs
- L'entourage rigide profond permet au masque de convenir à une plus grande variété de nez

Silencieux, épuré et esthétique

- La multitude de petits orifices de ventilation permet la diffusion de l'air en silence
- Dimensions, matières utilisées, tout concourt à la légèreté du masque

AVANTAGES POUR LES PROFESSIONNELS

Ajustement parfait dès la première tentative pour un plus grand nombre d'utilisateurs

- L'association de la molette de réglage MicroFit à la bulle à double jupe permet d'obtenir un ajustement parfait pour une grande variété de visages, dès la première tentative
- Avec cinq tailles de bulle, dont une nouvelle taille Petite (bulle et entourage rigide), le masque convient à un plus grand nombre d'utilisateurs

Satisfaction et observance des patients

- Augmentation de l'acceptation du traitement grâce à l'ajustement parfait dès la première tentative
- Personnalisation de l'ajustement, du confort et de l'étanchéité pour favoriser l'observance à long terme
- Les composants du masque ont été conçus dans un souci de rapidité et de facilité de montage et de démontage
- Kit d'information complet pour le patient, comprenant un sac de transport et un manuel utilisateur avec instructions de mise en place et d'entretien

Optimisation des coûts et du temps

- Réduction du temps d'ajustement et de formation : l'association de la molette de réglage à la bulle permet d'obtenir rapidement une bonne étanchéité
- Réduction du nombre de plaintes et de retours grâce à la facilité d'utilisation et d'ajustement
- Deux tailles d'entourage rigide acceptant chacune les cinq tailles de bulle

CODES PRODUIT

Masque nasal Mirage Micro

Europe ¹	
Petit	16338
Médium	16339
Large	16340
Large-Wide	16341
X-Large	16342

Europe ²	
Petit	16343
Médium	16344
Large	16345
Large-Wide	16346
X-Large	16347

Europe ³	
Petit	16348
Médium	16349
Large	16350
Large-Wide	16351
X-Large	16352

Asie-Pacifique	
Petit	16368
Médium	16369
Large	16370
Large-Wide	16371
X-Large	16372

¹ Anglais, allemand, français, espagnol, italien, portugais et néerlandais

² Anglais, suédois, norvégien, danois, finnois, hongrois, polonais et grec

³ Anglais, russe, turc, tchèque