

## Mirage Micro™

### NASENMASKE

#### BEWÄHRTE ABDICHTUNG, PERFEKTER SITZ

Die neueste Nasenmaske von ResMed bietet individuellen Sitz, Abdichtung und Komfort.

Der einzigartige MicroFit™-Regler sorgt gemeinsam mit dem bewährten doppelwandigen Mirage™-Maskenkissen für die

Feinabstimmung der Maske auf jeden einzelnen Patienten.

Dank ihrer leichten Handhabung durch Schlaftherapeuten und Patienten setzt Mirage Micro neue Maßstäbe für Nasenmasken.

#### MicroFit-Regler

bietet 24 Positionen für besseren Sitz, Abdichtung und Komfort

#### Optimierte Stirnstütze

erlaubt gute Sicht dank elegantem, schlankem Design

#### Leise Ausatemöffnung

für minimalen Geräuschpegel, abnehmbare Abdeckung zur leichten Reinigung


#### Um 360° drehbares Kniestück

optimale Einstellung des Atemschlauchs für maximalen Komfort



#### Kniestück

unterstützt die CO<sub>2</sub>-Auswaschung und reduziert das Geräusch

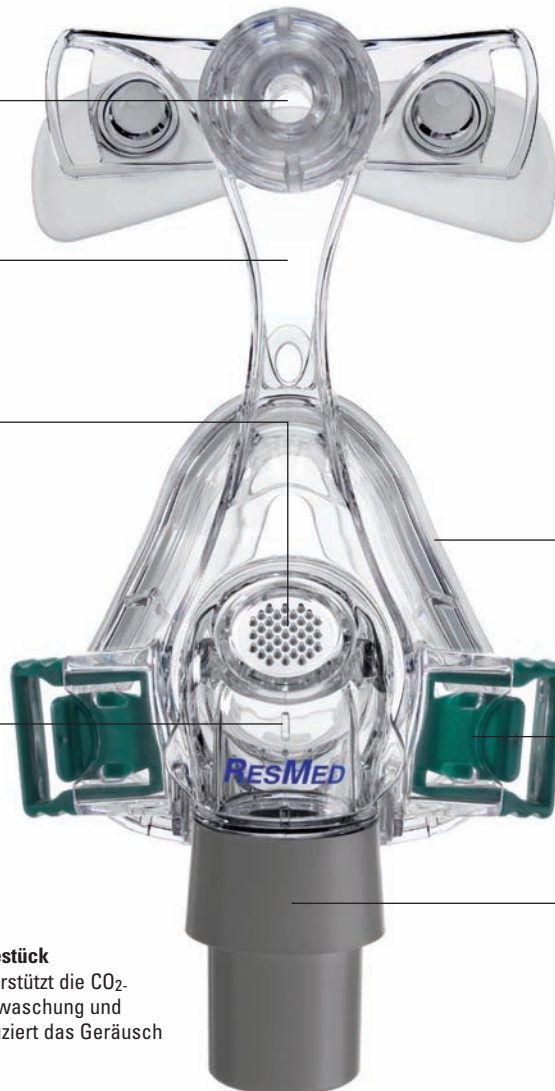

#### Doppelwandiges Mirage-Maskenkissen

reduziert den Druck auf den Nasenrücken und sorgt für gute Abdichtung; Lasche erleichtert das Abnehmen des Kissens vom Maskenrahmen

#### 2-Punkt-Kopfband-Clips

sorgen für optimale Kopfbandeinstellungen, einfach anzubringen und zu entfernen

#### Drehadapter

ermöglicht das praktische Anschließen und Abnehmen des Atemschlauchs



## TECHNISCHES HIGHLIGHT

### MicroFit-Regler

Sie wählen zwischen 24 Einstellungen – bequemer und besserer Sitz für mehr Patienten.

- **Anpassungsfähig:** Kann ganz einfach direkt auf dem Gesicht des Patienten angepasst werden.
- **Präzise:** Durch Drehung des Reglers wird die Stirnstütze in kleinen Schritten verstellt.
- **Schritt für Schritt:** Schmiegt sich an das Gesicht des Patienten an und erlaubt ihm so, den besten Sitz zu finden.
- **Funktioniert in Kombination mit dem Kissen:** Während der Regler den Neigungswinkel der Maske verstellt, passt sich das doppelwandige Mirage-Maskenkissen an und verbessert so die Abdichtung, ohne dass die Kopfbänder zu fest angezogen werden müssen.

## VORTEILE FÜR DEN PATIENTEN

### Einfach leicht

- Der MicroFit-Regler kann selbst im Liegen ganz einfach mit einer Hand verstellt werden.
- Die Abdeckung mit Ausatemöffnungen kann zur leichten und hygienischen Reinigung entfernt werden.
- Intuitives Maskendesign für einfache Handhabung, Reinigung, Zusammen- und Auseinanderbau

### Individuelle Passform und Komfort

- Mit dem MicroFit-Regler kann die Passform genau auf jeden Patienten zugeschnitten werden.
- Das doppelwandige Mirage-Maskenkissen ist in fünf Größen erhältlich (einschließlich der neuen Größe Small) und passt so mehr Patienten.
- Der tiefere Maskenrahmen passt besser für unterschiedliche Nasengrößen.

### Leise, elegant und modern

- Eine Reihe kleiner, integrierter Ausatemöffnungen diffundieren die Luft leise.
- Das optimierte Design fühlt sich leicht auf dem Gesicht an.

## VORTEILE FÜR DEN MEDIZINISCHEN ANWENDER UND DEN FACHHÄNDLER

### Guter Sitz beim ersten Anpassen für mehr Patienten

- Die Kombination aus MicroFit-Regler und doppelwandigem Mirage-Maskenkissen sorgt für perfekten Sitz bei verschiedenen Gesichtsformen – sofort und jedes Mal.
- Fünf Kissengrößen einschließlich der neuen Größe Small (Kissen und Rahmen) passen mehr Patienten.

### Patientenzufriedenheit und Compliance

- Höhere Therapieakzeptanz durch sicheren Sitz beim ersten Anpassen.
- Individuelle Passform, Komfort und Abdichtung fördern die langfristige Compliance.
- Die Maske kann schnell und praktisch zusammen- und auseinandergebaut werden.
- Umfassende Informationen für den Patienten mit Reisetasche und Gebrauchsanweisung mit Anleitungen zum Anlegen und zur Pflege der Maske.

### Kosten- und Zeiteinsparungen

- Kürzere Anpassungs- und Schulungszeit: Die Kombination aus Regler und Kissen sitzt schnell richtig.
- Weniger Beschwerden Einfache Anwendung und Anpassung
- Zwei Rahmengrößen und fünf Kissengrößen

## ARTIKELNUMMERN

### Mirage Micro Nasenmaske

Europa <sup>1</sup>	
Small	16338
Medium	16339
Large	16340
Large Wide	16341
X-Large	16342

Europa <sup>2</sup>	
Small	16343
Medium	16344
Large	16345
Large Wide	16346
X-Large	16347

Europa <sup>3</sup>	
Small	16348
Medium	16349
Large	16350
Large Wide	16351
X-Large	16352

Asien-Pazifik	
Small	16368
Medium	16369
Large	16370
Large Wide	16371
X-Large	16372

<sup>1</sup> Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch und Holländisch

<sup>2</sup> Englisch, Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch, Ungarisch, Polnisch und Griechisch

<sup>3</sup> Englisch, Russisch, Türkisch, Tschechisch