

**ResMed**

LifeChoice **Activox**<sup>™</sup> 4L

Concentrateur d'oxygène portable



Oxygène et mobilité combinés

Favoriser la déambulation de vos patients sous oxygène

# La liberté en toute tranquillité grâce à l'autonomie portable

Le Concentrateur d'Oxygène Portable (COP) LifeChoice Activox 4L est le passeport de votre patient pour une plus grande liberté et une qualité de vie améliorée.

Avec son niveau d'oxygène, son autonomie de plus de 10h, et son format léger et peu encombrant, l'Activox 4L s'intègre facilement dans le quotidien du patient qui peut reprendre une vie active et oublier son traitement.



## Conçu pour la mobilité

### Léger et portable

- 2,2 kg seulement
- Une sacoche 3 en 1 pour plus de possibilités et de liberté : en sac à main, en bandoulière, en sac à dos.



### Se déplacer en toute tranquillité

- Plus de 10h d'utilisation sur batterie interne\*
- 4h45 supplémentaires avec la batterie externe\*
- L'adaptateur CA secteur tout comme celui CC pour allume-cigare, permettent de recharger tout en fonctionnant, à domicile ou en déplacement.

### Simple et facile d'utilisation

- Un écran LCD rétroéclairé qui permet une utilisation facile aussi bien sous le soleil que dans l'obscurité.
- Les informations utiles directement accessibles (niveau de batterie, réglage...) ainsi que les alarmes ou messages d'erreur le cas échéant.

La simplicité et la facilité d'utilisation donnent confiance et favorisent l'autonomie du patient.

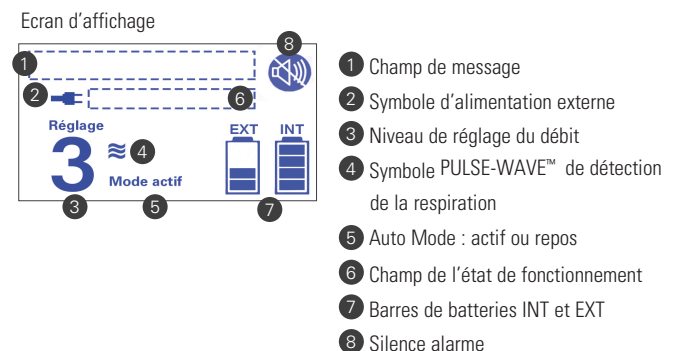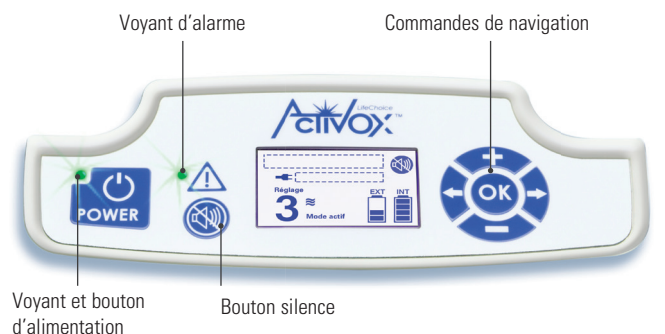






## Une thérapie astucieuse pour un maximum de confort

Le LifeChoice Activox 4L a été conçu pour répondre aux besoins des patients et leur offrir la liberté, le confort et la confiance qu'ils peuvent attendre d'un traitement portatif.

Un algorithme réactif qui suit le rythme du patient et délivre la dose utile d'oxygène, au moment pertinent.

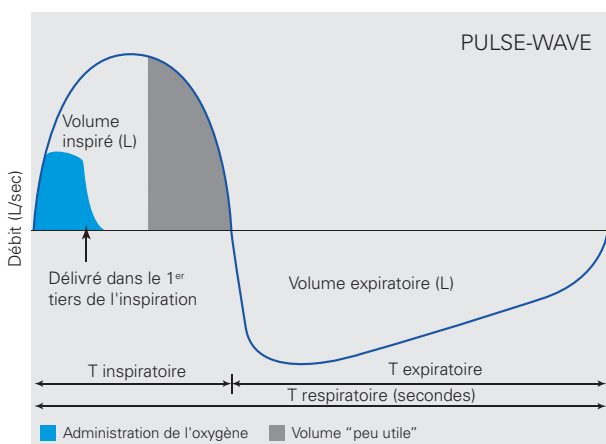

### Un mode d'administration de l'oxygène efficace

- La technologie PULSE-WAVE™ délivre de façon efficace la dose requise d'oxygène, en minimisant les pertes et en réduisant le risque d'irritation et d'écoulement nasal.
- L'Auto Mode perçoit les changements d'activité du patient et adapte sa sensibilité pour suivre la respiration.
- L'Auto Dose, fonctionnalité de l'Auto Mode est une dose de sécurité délivrée si l'appareil ne détecte plus la respiration du patient.



## Adapté à chacun

Léger et intuitif, le Lifechoice Activox 4L contribue à satisfaire les patients qui se sentent rassurés et capables de se déplacer en toute confiance.

Nouvel arrivant dans le portefeuille de produits ResMed, il bénéficie de tous les services associés : la formation, le service client, le SAV, la qualité et la présence de la force de vente.

## Un partenaire pour un second souffle

ResMed s'attache à développer des solutions innovantes pour traiter et gérer les troubles respiratoires du sommeil et de la ventilation.

Avec le concentrateur d'oxygène portable Activox, nous complétons les solutions proposées à vos patients insuffisants respiratoires, notamment atteints de BPCO. Nous nous sommes engagés à améliorer la qualité de vie des patients et l'efficacité des coûts de santé. Notre but est d'être votre partenaire : vous offrir la technologie et l'expertise dont vous avez besoin pour apporter un changement positif dans la vie de vos patients.





# Se déplacer en toute sérénité

Le kit LifeChoice Activox 4L comprend tout ce dont vos patients ont besoin. L'appareil est équipé d'algorithmes intelligents, de paramètres ajustables et de fonctionnalités pertinentes pour répondre aux besoins thérapeutiques de vos patients. Les sacoches de transport, les différentes options de recharge et les sangles réglables offrent liberté et flexibilité.



## Un kit initial complet

- A** LifeChoice Activox 4L
- B** Sacoche 3 en 1  
Sac à main, sac à dos, sac à bandoulière
- C** Kit de sangles ajustables  
A utiliser avec la sacoche 3 en 1
- D** Chargeur CC allume-cigare
- E** Chargeur secteur et cordon secteur adapté au pays  
Pour alimenter et recharger sur secteur
- F** Canule nasale standard monolumène (210 cm)\*\*
- G** Sac pour accessoires  
Pour les chargeurs, sangles, manuel etc...
- H** Batterie externe (vendue séparément)
- I** Poignée amovible



## Spécifications techniques

<b>Administration de l'oxygène</b>	PULSE-WAVE - Positions 1-4
<b>Concentration d'oxygène</b>	90 % ± 3 %
<b>Poids</b>	2,2 kg (4,8 lbs)
<b>Dimensions (L x H x D)</b>	230 mm x 200 mm x 112 mm
<b>Type d'affichage</b>	Ecran LCD rétroéclairé et boutons
<b>Certificat de transport aérien FAA</b>	•

## Autonomie des batteries

Position	1	2	3	4
<b>Autonomie batterie interne (heures)***</b>	10h15	8h15	5h	4h
<b>Autonomie batterie externe (heures)***</b>	4h45	3h45	2h45	2h15
<b>Autonomie totale (heures)***</b>	15h	12h	7h45	6h15
<b>Temps de charge***</b>	Interne : 4h - Externe : 2h			

## Codes produits

LifeChoice Activox 4L kit – France	<b>AOX-P4L-FR</b>	Chargeur secteur avec cordon	<b>XYC089-K</b>
LifeChoice Activox 4L kit – BeNeLux	<b>AOX-P4L-NL</b>	Chargeur secteur sans cordon	<b>XYC089</b>
Sacoche	<b>123-102</b>	Cordon CA secteur	<b>XYC494</b>
Kit de sangles	<b>XYC414</b>	Lunette nasale pour adulte	<b>XYC262</b>
Adaptateur CC allume-cigare	<b>122-222</b>	Batterie externe (vendue séparément)	<b>200122</b>
Sac pour accessoires	<b>XYC340</b>		

\* En position 1

\*\* La canule nasale peut ne pas être incluse

\*\*\* Les heures sont une estimation, cela dépend aussi de la fréquence respiratoire

**ECIREP** QNET B.V. (NL). Distribué par : ResMed SAS - Parc Technologique de Lyon - 292, allée Jacques Monod – 69791 Saint Priest Cedex – France

Veuillez consulter Resmed.com pour obtenir les coordonnées des bureaux ResMed dans le monde. Activox, LifeChoice, PULSE-WAVE sont des marques commerciales et/ou des marques déposées du groupe ResMed. Pour des informations relatives aux brevets, consultez ResMed.com. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. La disponibilité des produits peut varier selon les régions.

Le concentrateur d'oxygène portable Lifechoice Activox est utilisé sous prescription médicale pour les patients nécessitant un apport supplémentaire en oxygène. Il fournit un apport d'oxygène à haute concentration. Il peut être utilisé en continu à domicile ou en établissement spécialisé ou en voyage - Dispositif médical de classe IIa - Evaluation de conformité par LNE0459 - Lire attentivement le manuel utilisateur fourni avec le dispositif - Pris en charge par les organismes d'assurance maladie dans certaines situations : consultez les modalités sur le site [www.ameli.fr](http://www.ameli.fr). © 2017 ResMed Ltd. 10110186/1 2017 06

 Inova Labs  
3500 Comsouth Drive, Suite 100  
Austin, TX 78744 USA

ResMed.com