

Mirage Quattro™

フルフェイス マスク

第四世代テクノロジー

広範囲な装着性： ResMed の第四世代フルフェイスマスクは、95%以上のユーザーに装着することができます。*

Mirage™スプリングエアテクノロジーによるデュアルウォールクッション： 独自のクッションは睡眠中の動きに適合し、下あごの動きに対する効果的な解決方法を提供します。

MicroFit ダイヤル： 前頭サポートの新しい調整によって、個人に合わせた装着性と快適性を提供します。

軽く、静かで、簡単な使用： 流線型をしたマスク デザイン、改良されたパッド デザイン、そしてさまざまなユーザー フレンドリーな設計によって、これらの特長がもっとも効果的に発揮されています。

MicroFit ダイヤル

95%以上のユーザーに装着性、密閉性、そして快適性を提供します*

改善されたビルトインパッド


最小限に抑えられたノイズ

タブ付きのクッションクリップ

フレームからクッションの取り外しを容易にします

下あごの移動クッションメンブレン

密閉性を維持し、下あごの動きにも適合します

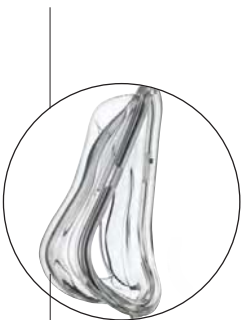

マスククッションの側面に見えるメンブレン

セットアンドフォゲット ヘッドギア スロット

最適な装着設定を保存します

鼻柱における移動クッション メンブレン

異なる鼻の構造にも適合させ、目へのリークを防ぎます

Mirageスプリングエアテクノロジーによるデュアルウォールクッション

もっとも必要とされる箇所の密閉性を高めます

セットアンドフォゲット ヘッドギア クリップ

マスクの取り外しを容易にします

簡易エルボー 窒息防止バルブ (AAV)付き

容易な組み立てと分解を可能にする少ないエルボー部品；AAVはマスクへの空気の流れが阻害されたときに安全性を確保します





主要テクノロジー

MicroFit ダイアル

ワンタッチ操作による24ポジションの選択によって、95%以上のユーザーに快適で、容易な装着性を提供します*

- **調整**：ユーザーの顔に装着したまま調整することができます
- **正確**：ダイアルを回転させながら、前頭サポートをわずかに増加させて調整することができます
- **漸進**：ユーザーが一番快適に装着できるポジションを感じることで顔面への動き
- **クッションと組み合わせる働き**：ダイアルが顔面に対するマスクの角度を調節するのにともない、ヘッドギアを強く締め付けることなく、密閉がもっとも必要な箇所を確実にものとするように、クッションが調整していきます

ユーザーに対する特長

個人に合わせた快適性

- ユーザーの特徴に合わせるために、MicroFit ダイアルでマスクを調整します
- スプリングエアークッションによるデュアル-ウォールクッションは、顔の輪郭に合わせて、下あごの動きを含む睡眠中の動きにも適合します

軽く、静か

- 流線型のデザインは顔に装着しても軽く感じることができます
- 改良されたベント デザインはノイズを軽減します

簡単

- MicroFit ダイアルとスプリングエアークッションテクノロジーは、最良の装着感を最初から、そして毎回得られるようにします
- 少ない部品数は取り扱い、清掃、組み立てや分解を簡単にします

専門職に対する特長

95%以上のユーザーに適合できるようになりました*

- MicroFit ダイアルとスプリングエアークッションによるデュアル-ウォールクッションは、より多くの顔の構造に適合できるようになりました
- 新しい特小マスク サイズ

顧客の満足度とコンプライアンス

- トラベルバック、マスクケア DVD、装着クイックガイド、ユーザーガイドによる総合的なユーザー サポート パッケージ
- 初回の装着性の高さからセラピー支持の増加
- 個人に合わせた装着性、快適性と密閉性は、長期間のコンプライアンスを促進します
- 素早く簡単な組み立てや分解を可能にする簡易部品構成

コストおよび時間効率

- インベントリの削減：Ultra Mirage™ フルフェイス マスクより33%も少ない商品コードと少ないマスク部品
- 装着時間とトレーニング時間の削減：改良されたクッション テクノロジーで素早く密閉させることができます
- コールバックの削減：使いやすさと装着性

プロダクトコード

Mirage Quattro フルフェイス マスク

ヨーロッパ¹

特小	61204
小	61205
中	61206
大	61207

ヨーロッパ²

特小	61208
小	61209
中	61210
大	61211

ヨーロッパ³

特小	61228
小	61229
中	61230
大	61231

フランス

特小	61220
小	61221
中	61222
大	61223

英国

特小	61224
小	61225
中	61226
大	61227

アジア パシフィック

特小	61216
小	61217
中	61218
大	61219

ANZ

特小	61212
小	61213
中	61214
大	61215

¹ 英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ポルトガル語、オランダ語

² 英語、スウェーデン語、ノルウェー語、デンマーク語、フィンランド語、ハンガリー語、ポーランド語、ギリシャ語

³ 英語、ロシア語、トルコ語、チェコ語、エストニア語、スロベニア語、スロバキア語、ブルガリア語、ルーマニア語、ラトビア語、リトアニア語

* 出典：ResMed 人体測定学の内部データ