

Mirage Micro™

NESEMASKE

UTPRØVD FORSEGLING, PERFEKT PASSFORM

Den nyeste generasjon nesemaske fra ResMed gir personlig tilpasset passform, forsegling og komfort for de fleste brukere. Den utprøvede Mirage™-cushion med dobbeltvegg er tilpasset

maskens unike MicroFit™-skrue og kan derfor fintilpasses hver individuelle bruker. Mirage Micro er intuitiv i bruk for kliniker og brukere, og er den nye standarden for nesemasker.

MicroFit-skruen
har 24 posisjoner for bedre tilpasning, forsegling og komfort

Strømlinjeformet pannestøtte
gir fritt synsfelt på grunn av elegant, stilig design

Stille ventildesign
gir minimal støy og har avtakbar klemme for enkel rengjøring


360° kneleddsrotasjon
posisjonerer slangen for maksimal komfort

Design på kneleddet
letter utvasking av CO₂ og reduserer støynivået

Mirage-cushion med dobbeltvegg
reduserer trykket på neseryggen og tetter effektivt; en flik gjør det enkelt å fjerne cushionen fra rammen

"Tilpass-og-glem"-hoderemklemmer ("Set-and-forget"-klemmer)
holder hoderemmene på plass. Lett å sette på og ta av.

Svivel
gir bekvem tilkobling og frakobling av luftslangen

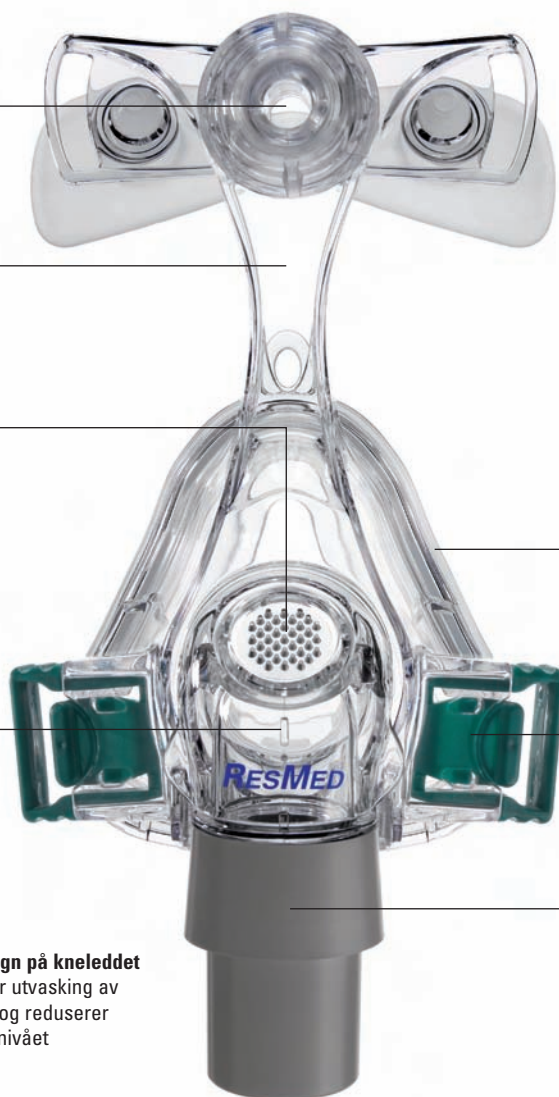



TEKNOLOGISKE HØYDEPUNKTER

MicroFit-skrue

Du kan lett velge mellom 24 posisjoner – gir komfortabel, effektiv passform for flere brukere

- **Justerbar:** kan lett justeres mens den sitter på brukerens ansikt
- **Nøyaktig:** hver rotasjon på skruen justerer pannestøtten i små trinn
- **Gradvis bevegelse:** beveger seg mot ansiktet og gjør det mulig for brukeren å føle når passformen er mest komfortabel
- **Fungerer i kombinasjon med cushionen:** etter hvert som skruen justerer vinkelen mellom masken og ansiktet, tilpasses cushion med dobbeltvegg slik at den fremmer forseglingen uten å overstramme hodestroppene

FORDELER FOR BRUKEREN

Enkel og intuitiv

- MicroFit-skrue kan lett justeres med én hånd, selv i liggende stilling
- Ventilklemmen kan fjernes for lett og hygienisk rengjøring
- Intuitiv maskedesign for lett håndtering, rengjøring, montering og demontering

Personliggjort passform og komfort

- MicroFit-skrue fininnstiller passformen slik at den passer til hver brukers profil
- Mirage cushion med dobbeltvegg er tilgjengelig i fem størrelser, inkludert den nye Small-størrelsen, for å passe til flere brukere
- Dyp maskeramme-design gir god tilpasningsform for en større variasjon av nesestrukturer

Stille, elegant og stilig

- En rekke små, innebygde ventiler sprer luften stille
- Strømlinjet design føles lett på ansiktet

FORDELER FOR FAGFOLK

God førstegangs passform for flere brukere

- Kombinasjonen MicroFit-skrue og cushion med dobbeltvegg utgjør den perfekte passformen for en rekke ansiktsstrukturer – første gang, hver gang
- Fem cushionstørrelser, inkludert den nye Small-størrelsen (cushion og ramme) passer til en større brukergruppe

Kundetilfredshet og samsvar

- Økte behandlingsresultater på grunn av god førstegangs passform
- Personliggjort passform, komfort og forsegling gir økt compliance
- Maskedelene er fremstilt for rask og intuitiv montering og demontering
- Omfattende bruker støttepakke, inkludert reiseveske og brukerveiledning med instruksjoner om masketilpasning og stell

Kost- og tidseffektiv

- Redusert tilpasnings- og opplærings tid: skru-cushion-kombinasjonen forsegles hurtig
- Redusert retur: lett i bruk og tilpasning
- To rammestørrelser passer til fem cushionstørrelser

PRODUKTKODER

Mirage Micro nesemaske

Europa ¹	
Small	16338
Medium	16339
Large	16340
Large Wide	16341
X-Large	16342

Europa ²	
Small	16343
Medium	16344
Large	16345
Large Wide	16346
X-Large	16347

Europa ³	
Small	16348
Medium	16349
Large	16350
Large Wide	16351
X-Large	16352

Asia-Stillehavsområdet	
Small	16368
Medium	16369
Large	16370
Large Wide	16371
X-Large	16372

¹ Engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, portugisisk og nederlandsk

² Engelsk, svensk, norsk, dansk, finsk, ungarsk, polsk og gresk

³ Engelsk, russisk, tyrkisk, tsjekkisk