

Laget med omsorg



Som lederen innen masketeknologi har ResMed inngått samarbeid med pедиатriske helseeksperter for å gi deg Pixi™ – en barnemaske utformet med barn og deres familier i tankene.

En maske laget spesielt for barn

Pixi barnemaske er unikt konstruert ved hjelp av antropometriske data fra barn i alderen to år og oppover, og er ikke bare en nedskalert versjon av masken for voksne.

Masken tar hensyn til barns benbygning, ansiktstrekk og hudfølsomhet, og er laget for å minimere trykket på myke ansikter.

Og i kombinasjon med ResMeds nyeste Stellar™ 100-ventilator eller VPAP™ ST-apparat™, har du den perfekte pедиатriske løsningen som gir økt komfort og pålitelighet for barn i alderen to år og oppover som veier mer enn 13 kg.

Pixi barnemaske er laget med både barnet og omsorgspersonen deres i tankene.

Hver funksjon er nøye vurdert for å gi bedre **behandlingskomfort, aksept og totalopplevelse for alle involverte** – slik at omsorgspersoner kan være fri til å fokusere på følelsesmessig støtte til barnet under prosessen.



Pixi™
BARNEMASKE



Teknologiske høydepunkter

NYTT Hodestropp utformet spesielt for barn*

Tre justeringspunkter – masken kan justeres med topp-, side- og bunnstroppen, noe som gir et større justeringsområde for å passe til barn i ulike aldre.

Utenfor synsvidden – hodestroppen er laget for å sitte unna barnets øyne og ører i den hensikt å redusere irritasjon og obstruksjon.

Klar siktlinje – ikke bare kan barnet se klart mens masken brukes, men pårørende blir også beroliget og lettet ved å kunne se barnets øyne og mer av ansiktet.

**Utformet ved hjelp av spesifikke antropometriske data fra barns hoder og ansikter.*

Myk, behagelig pute


Tynn silikonpute med enkeltvegg minimerer trykket på barns myke ansikter uten at forseglingen brytes

To slangeposisjoner

Luftslangen kan flyttes til hver side av puten avhengig av barnets sovestilling

Spring-flex lettvektig slange

strekker og bøyer seg enkelt, slik at den ikke setter seg fast eller gir drag mens barnet rører på seg i søvne

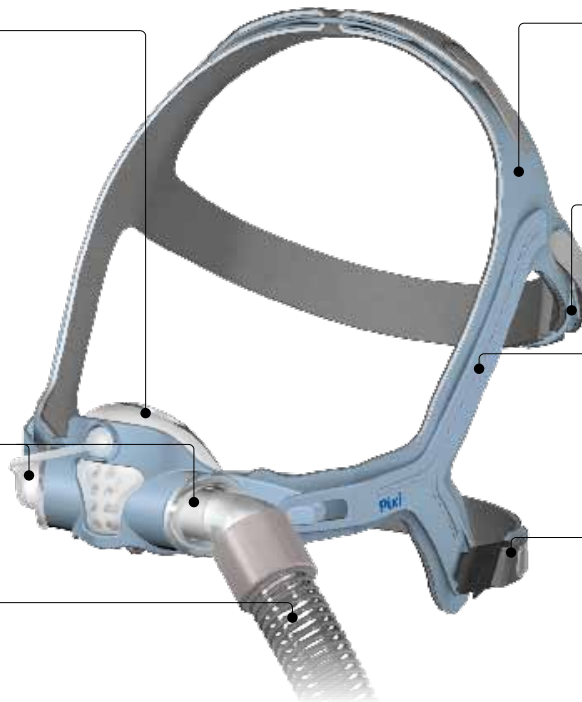

Komfortable hodestroppmaterialer i

Breathoprene™, lett farget for en mer betryggende, diskrete fremtoning på barnets ansikt

Sidevendt bakstropp

ergonomisk utformet fra synsvinkelen til den voksne som tilpasser masken

Med fleksible stabilisatorer

kan masken tilpasses hvert barns unike ansiktsstruktur og -form for den mest tilpassede passformen

Hurtiglåsen

gjør det enkelt å ta av masken og samtidig beholde ønskede hodestroppinnstillinger

Nødlås

Lås opp enda raskere i en nødsituasjon ved å trekke hardt i den nedre hodestroppen

Komplett maskesystem

Pixi 61031

Kombiner Pixi-masken

med de nyeste Stellar 100- eller VPAP-enhetene for et system som gir større komfort og pålitelighet og mer effektiv behandling.



Stellar 100



VPAP ST



Pixi-maske



Pixi™
BARNEMASKE