

Ultra Mirage™

IKKE-VENTILERT, HELMASKE

DET STABLE VALG FOR IKKE-INVASIV VENTILASJON

ResMeds Ultra Mirage ikke-ventilert (NV), hel ansiktsmaske gir enestående tetning, stabilitet og komfort for ikke-invasiv ventilering over lang tid i hjemmet – så vel som i sykehusmiljø.

Ved å bygge videre på egenskapene til ResMeds pålitelige masker i Mirage™-serien, introduserer Ultra Mirage NV nye egenskaper og forbedringer i utforming for bedre terapi, lettvinthet og bekvemhet.

Den justerbare pannestøtten kan bli stilt i den mest effektive stillingen, selv mens pasienten bruker masken, som gir forbedret generell stabilitet og vedlikehold av forsegling.

Hodestropp med hurtigspenne

Lettvint å bruke og fjerne masken uten å miste optimal innstilling av hodestoppene

Justerbar pannestøtte

Valg mellom fire posisjoner slik at masken kan tilpasses enhver pasient, gir bedre tetning, stabilitet og komfort

Mirage dobbeltvegget pute

ResMed sin patenterte teknologi holder tetningen effektivt vedlike og tilpasses pasientens bevegelser når hun/han sover

Utlørsnor

En sikkerhetsmekanisme som lar pasienten fjerne masken med en enkel bevegelse i en nødssituasjon

Bøyerlige pannebeskyttere

Udelte utforming fordeler trykket jevnt og tilpasser seg pasientens panneform

Klar (ikke-farget) ramme


Det klare materialet gjør det mulig for pleieren å overvåke pasientens ansikt for eventuelle endringer under bruken

360° roterende vinkelrør

Tilbyr fleksibilitet og kontroll over pustekretsen og forbedrer bruken, komforten og mobiliteten

Blåtonefarget vinkelrør for bedret sikkerhet

Spesielt utformet slik at det ikke kan forbyttes med det klare vinkelrøret til ResMed ventilerte masker

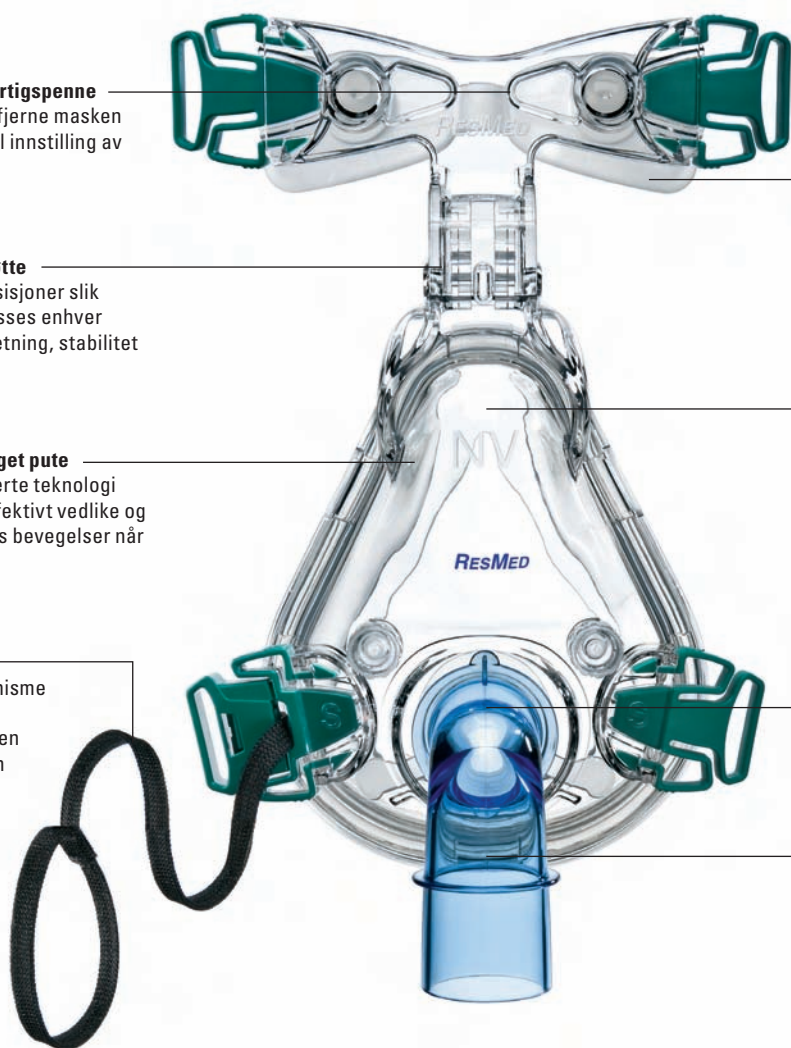

TEKNOLOGISKE HØYDEPUNKTER

1. Justerbar pannestøtte – forbedret tetning og stabilitet

- Enkel justering i fire stillinger med masken på pasientens ansikt.
- Fleksible panneputer passer formen på pasientens panne, distribuerer trykket jevnt over en større overflate og reduserer trykket mot pasientens ansikt.

2. Utløersnor – trygghet i en nødssituasjon

- Brukes av pasienten til å fjerne masken raskt fra ansiktet; lett å bruke og effektivt i en nødssituasjon.
- Når snoren trekkes, separeres et todelt spenne som gjør det mulig å fjerne masken med én enkel bevegelse.



PASIENTFORDELER

Moden teknologi, pålitelig komfort

- Mirage dobbeltvegget puteteknologi reduserer trykk mot nesens, forbedrer tetningen og komfort.
- 360° roterende vinkelrør gir ekstra stabilitet og er praktisk.

Forsikring om at foreskrevet behandling blir gitt

- Enestående tetning og stabilitet gir pasientene sinnsro.

Praktisk for bruker

- Når hodestroppen er tilpasset, trenger det ikke å justeres igjen – den optimale innstillingen bevares.
- Utløersnor gir sinnsro og en følelse av trygghet.

FAGMESSIGE FORDELER

Visssheten om at pasienten blir behandlet effektivt

- Siden masken dekker både nese og munn, gir den effektiv behandling selv ved pusting gjennom munnen.

Gjennomprøvd kvalitet og teknologi som er til å stole på

- ResMeds patenterte Mirage dobbeltvegget puteteknologi gir bedre ytelse gjennom bedret tetning og komfort.

Praktisk og sikker

- Hodestropp med hurtigspenne gir raskere og enklere tilpasning.
- Utløersnor gjør det mulig å fjerne masken raskt i en nødssituasjon.

Effektivt valg av maskestørrelse

- 3D-tilpasningsmaler bidrar til at masken passer første gangen.
- Bruk av malene kan også redusere tiden som kreves for å tilpasse masken.

PRODUKTKODER

Ultra Mirage™ ikke-ventilert hel ansiktsmaske

Europa¹, ANZ og Asia/Stillehavet

Small Shallow	60642
Small Standard	60643
Medium Shallow	60644
Medium Standard	60645
Large Shallow	60646
Large Standard	60647

Europa²

Small Shallow	60648
Small Standard	60649
Medium Shallow	60650
Medium Standard	60651
Large Shallow	60652
Large Standard	60653

Europa³

Small Shallow	60606
Small Standard	60607
Medium Shallow	60608
Medium Standard	60609
Large Shallow	60616
Large Standard	60617

Europeisk bruksanvisning er tilgjengelig på følgende språk:

¹ Engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, portugisisk og nederlandsk

² Engelsk, svensk, norsk, dansk og finsk

³ Engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, portugisisk, nederlandsk, ungarsk, russisk, polsk, tyrkisk, tsjekkisk, slovakisk og gresk