

Mirage Micro™

NÄSMASK

BEPROVAD FÖRSEGLING, PERFEKT PASSFORM

Senaste generationens näsmask från ResMed med individuell inpassning, försegling och komfort för ännu fler användare. Mirage™ mjukdel med dubbla väggar i kombination med

maskens unika MicroFit™ ratt ger varje användare perfekt passform. Intuitiva Mirage Micro sätter ny standard för näsmasker – både för sömnexterten och användaren.

Med MicroFit ratten

kan man välja mellan 24 olika positioner för bättre passform, försegling och komfort

Strömlinjeformat pannstöd


– smidig och elegant design för ett fritt synfält

Ventilens design

gör masken maximalt tyst. Borttagningsbar ventillock för enkel rengöring

Knärör som roterar 360°

gör att luftslangen sitter maximalt bekvämt

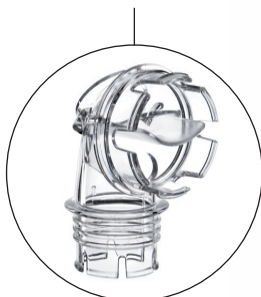

Delat knärör

för bättre utbyte av utandningsluft och tystare drift




Mirage mjukdel med dubbla väggar minskar trycket på näsryggen och ger effektiv tätning; en flik gör det lätt att ta bort mjukdelen från maskramen

Huvudbandets clips behöver bara passas in en gång för optimal passform; lätta att sätta fast och ta bort

Svängtapp

som gör det lätt att sätta fast och ta bort luftslangen

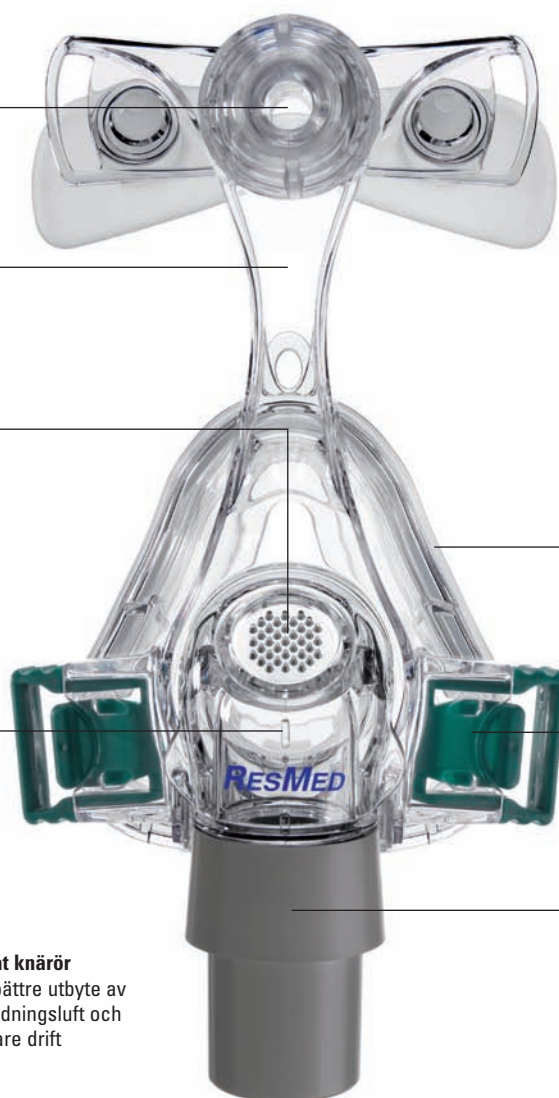



TEKNISK HÖJDPUNKT

MicroFit ratt

24 olika positioner som lätt ställs in med ena handen – ger ännu fler användare en bekväm, effektiv passform

- **Justerbar:** masken justeras lätt även när den sitter på ansiktet
- **Exakt:** varje gång du vrider på ratten justeras pannstödet ett litet steg i taget
- **Graderad:** flyttas stegvis närmare ansiktet och låter användaren själv avgöra den passform som känns mest behaglig
- **Fungerar tillsammans med mjukdelen:** ratten justerar maskens vinkling mot ansiktet och mjukdelen med sina dubbla väggar anpassas därefter för att ge bättre försegling utan att huvudbandet behöver sitta alltför stramt

FÖRDELAR FÖR ANVÄNDAREN

Intuitivt lätthanterlig

- MicroFit ratten justeras lätt med ena handen även när du ligger
- Ventillock som lätt kan tas bort för snabb och hygienisk rengöring
- Intuitiv design gör masken lätt att hantera, rengöra, montera och ta isär

Passform och komfort för varje enskild användare

- Med MicroFit ratten finjusteras passformen till varje användarprofil
- Mirage mjukdel med dubbla väggar finns i fem storlekar, inkl. ny Small-storlek, som passar ännu fler användare.
- Maskramens djupa utformning passar ännu fler näskonturer än tidigare

Tyst, smidig och elegant

- En rad små inbyggda ventiler som sprider luften mycket tyst
- Strömlinjeformad design som känns lätt mot ansiktet

FÖRDELAR FÖR KLINIKERN

Rätt passform redan från början

- MicroFit ratten i kombination med mjukdelens dubbla väggar passar en rad olika ansiktsformer perfekt – redan från första början
- Mjukdelen finns i fem storlekar, inkl. en ny Small-storlek, (mjukdel och ram) och passar en rad olika användare

Nöjda kunder, bättre compliance

- Förhöjd compliance med en mask som sitter perfekt redan från början
- Individuell passform, komfort och försegling för bättre compliance på lång sikt
- Maskdelarnas utformning gör att de monteras och tas isär snabbt och intuitivt
- Omfattande stödpaket för användaren, inkl. resväska och bruksanvisning med anvisningar om inpassning och skötsel

Sparar både tid och pengar

- Både inpassning och utbildning går fortare: kombinationen ratt och mjukdel ger snabb försegling
- Färre återbesök: lätt att använda och passa in
- Två ramstorlekar passar fem olika mjukdelstorlekar

PRODUKTKODER

Mirage Micro Nasal Mask

Europa¹

Small	16338
Medium	16339
Large	16340
Large Wide	16341
X-Large	16342

Europa²

Small	16343
Medium	16344
Large	16345
Large Wide	16346
X-Large	16347

Europa³

Small	16348
Medium	16349
Large	16350
Large Wide	16351
X-Large	16352

Asien/Stilla Havet

Small	16368
Medium	16369
Large	16370
Large Wide	16371
X-Large	16372

¹ Engelska, tyska, franska, spanska, italienska, portugisiska och holländska.

² Engelska, svenska, norska, danska, finska, ungerska, polska och grekiska

³ Engelska, ryska, turkiska, tjeckiska.